

GEZA *tone*

# ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР ДАРСОНВАЛЬ

4

сменных  
электрода

ЭЛЕКТРОД • ГРИБОК • ЭЛЕКТРОД • КАПЛЯ • ЭЛЕКТРОД • РАСЧЕСКА • ЭЛЕКТРОД • ЛЕПЕСТОК •



Серии Biolift4, модель 118

эффективность, проверенная временем

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДАРСОНВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Gezatone модель Biolift4 118

# ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

## ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

- Если Вас и членов Вашей семьи беспокоят воспаления на лице, расширенные поры, прыщи и угревая сыпь.
- Вы страдаете от отеков и хотите улучшить внешний вид и цвет лица.
- Стали заметны возрастными изменениями и мелкие морщинки.
- Замечаете как выпадают, становятся тусклыми и безжизненными волосы.
- Знаете не понаслышке, что такое целлюлит и варикозное расширение вен и боль в суставах.
- Хотите ускорить процессы заживления ран и ссадин.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ – ДАРСОНВАЛЬ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЛЕГКО СПРАВИТСЯ С ЭТИМИ И ДРУГИМИ ПРОБЛЕМАМИ



# ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

## МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

---

**ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ** - это воздействие на кожу высокочастотными переменными токами, которые имеют высокое напряжение, частоту колебаний и малую силу. Импульсы тока воздействуют на кожу через стеклянный электрод, заполненный проводящим газом. При контакте с кожей легкие микроразряды оказывают стимулирующее действие на кровообращение, активизируют обменные процессы, стимулируют лимфодренаж. Образование озона из кислорода воздуха оказывает мощное бактерицидное действие. Интенсивность разряда можно изменять в пределах от «тихого» до искрового.

**Терапевтическое влияние дарсонвализации проявляется:**

- БОЛЕУТОЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
- ПРОТИВОЗУДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
- УЛУЧШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- ПОВЫШЕНИЕМ ТРОФИКИ ТКАНЕЙ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОСПАЛЕНИЯМИ И УГРЕВОЙ СЫПЬЮ

Эффективность доказана и не имеет ограничений для пациентов любого возраста и пола.

# ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

---



### **ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ, ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ**

- жирная и проблемная кожа, гнойничковые поражения
- расширенные поры, акне
- мелкие морщины, первые признаки увядания кожи
- нездоровый цвет лица, морщинки в зоне декольте



### **ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УЧАСТКИ ТЕЛА**

- все типы и стадии целлюлита
- отечность ног
- профилактика варикозной болезни вен нижних конечностей
- сосудистая сетка на ногах



### **ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ**

- профилактика всех разновидностей облысения
- противодействие выпадению волос
- укрепление луковиц волос
- стимуляция процессов роста волос



# ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ


## ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ



В 1891 году французский физиолог и физик Жак Арсен Д'Арсонваль обнаружил физиотерапевтическое действие высокочастотных импульсных токов на кожные заболевания (сегодня это называется токами Дарсонваля).

Учёный предлагал лечить электричеством широкий спектр болезней — от кожных раздражений и мигрени до анемии и радикулита.

Токи Дарсонваля более 100 лет активно применяются в косметологии, и признаны одним из наиболее эффективных методов борьбы с различными косметическими недостатками и проблемами кожи.

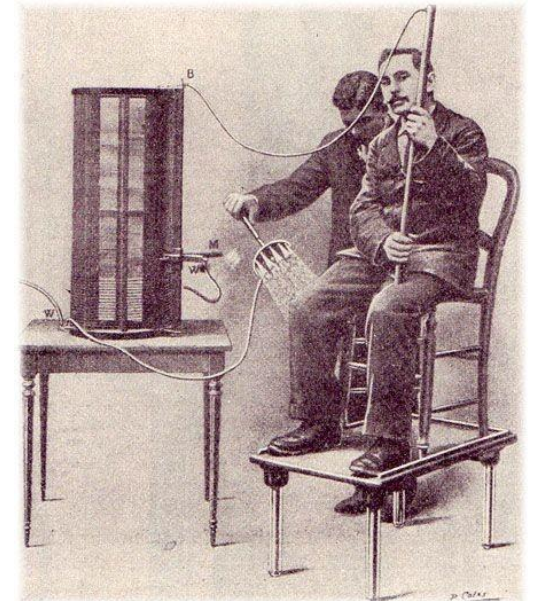

# ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

## СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ



**ДАРСОНВАЛИЗАЦИЮ МОЖНО ПРОВОДИТЬ КОНТАКТНО И ДИСТАНЦИОННО.**

При **контактной методике** электрод прикладывают к коже и легкими без нажима движениями перемещают, не отрывая от поверхности кожи. При контакте с кожей легкие микроразряды оказывают стимулирующее действие на кровообращение, активизируют обменные процессы, повышают тонус венозной сосудистой стенки, стимулируют лимфодренаж.



При **дистанционной методике** электрод размещают над местом воздействия на расстоянии 0,5—2 см, или плавно водят по массажным линиям, что обеспечивает образование искрового разряда. Дистанционная методика эффективна для воздействия на проблемную кожу, с воспаленными элементами, усиливается бактерицидным действием озона.

# ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT118

## НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

**НАСАДКА – ГРИБОК** является универсальной насадкой, которая может быть использована для процедур как по лицу, так и по телу, применяется для нормализации состояния жирной кожи, для профилактики варикоза и коррекции целлюлита.

**ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА – КАПЕЛЬКА** идеальна для «прижигания» отдельных воспаленных элементов и наиболее часто используется для воздействия на прыщики и герпес, локального воздействия на небольшие участки кожи.

**НАСАДКА - ЛЕПЕСТОК** используется для проведения омолаживающих процедур, для обработки проблемной кожи, для процедур по телу.

**НАСАДКА - ГРЕБЕНЬ** выполнена в форме расчески специально для воздействия на волосистую часть головы, для предотвращения выпадения волос, нормализации сальной секреции и улучшения состояния и роста волос.




ГРИБОК



КАПЕЛЬКА



ЛЕПЕСТОК

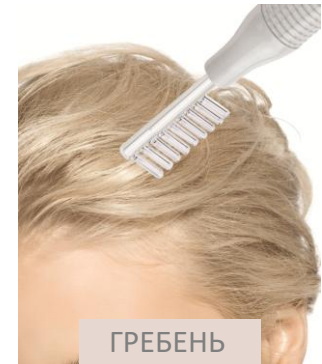


ГРЕБЕНЬ


# ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ


По многочисленным отзывам наших клиентов мы отметили, что подавляющее большинство покупателей сочли дарсонваль Biolift4 BT118 эффективным прибором для домашнего применения всей семьей.

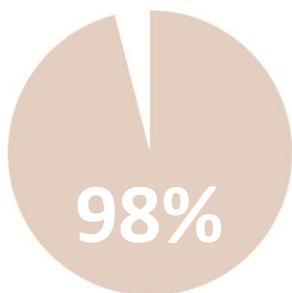


Отметили улучшения состояния кожи при акне и воспалениях.

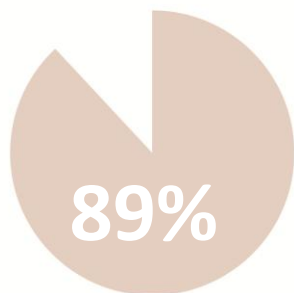


Сократилось выпадение волос, исчезли залысины, волосы стали расти быстрее.

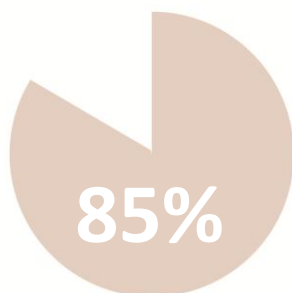

Избавились от проблем варикозного расширения вен и болей в ногах.

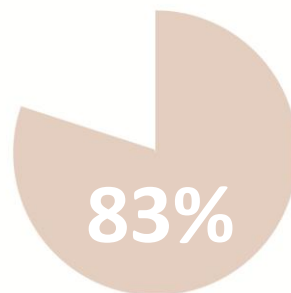

Регулярно пользуются всей семьей и каждый находит свою зону применения.

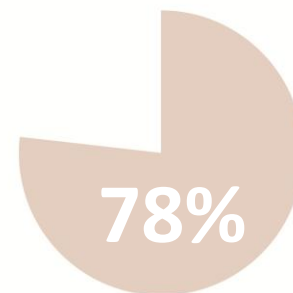

Самый лучший подарок для проявления заботы о самочувствии пожилых людей.



# ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT118

## ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

---

Универсальный массажер с 4-мя насадками для всей семьи – быстрое и эффективное избавление от косметических недостатков, возрастных изменений лица и тела, противодействие выпадению волос, снятие болевых синдромов – это незаменимый помощник в каждой семье!

- Выбрав прибор Дарсонваль BIOLIFT4 BT118 для домашнего использования, произведенный компанией Gezatone, Вы станете обладателем настоящего семейного доктора, который придёт на помощь в любое время к каждому члену Вашей семьи.
- Порадуйте себя и своих близких подарком, за который Вам скажут спасибо и вспомнят добрым словом.
- Миллионы людей уже сделали свой выбор - пришло время и Вам проявить заботу о здоровье и красоте близких людей, не забывая о себе.

# ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

## 6 ПРИЧИН КУПИТЬ ДАРСОНВАЛЬ VIOLIFT4 118 В «СОЗВЕЗДИИ КРАСОТЫ»

---



### КОНСУЛЬТАЦИИ

Доброжелательные продавцы подробно расскажут и продемонстрируют прибор.



### БЕЗОПАСНО

Все приборы имеют гарантированное качество, подтвержденное сертификатами.



### УДОБНО

Можно заказать прибор с доставкой в любую точку России.



### ДИСТАНЦИОННО

Специалисты «горячей линии» ответят на любые вопросы по применению.



### ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Есть возможность протестировать прибор, посетив ДЕНЬ КРАСОТЫ.



### ВЫГОДНО

Каждый покупатель получает 10% бонус на карту для оплаты последующих покупок.

# ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT118

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

---

Процедуры дарсонвализации проводятся по чистой сухой коже без применения косметических средств.

- Перед процедурой по лицу или по телу необходимо кожу хорошо очистить, подбирая средства по типу кожи.
- В процедурах по уходу за кожей головы и волосами необходимо вымыть голову.
- В завершении процедур и в промежутках между процедурами для поддержания эффекта рекомендуется использовать косметические средства подобранные в соответствии с потребностями кожи как для лица, так и для волос и тела.

**В таблице ниже представлены некоторые рекомендации по подбору средств для домашнего ухода.**

# ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT118

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ	ОЧИЩЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ		ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД	
<b>ДЛЯ ЛИЦА</b>  жирная, проблемная кожа	Очищающий гель «Контроль» Beauty Style 150 мл.		Корректирующая сыворотка «Контроль» Beauty Style 30 мл.	
<b>ДЛЯ ЛИЦА</b>  возрастные изменения	Крем - пилинг со стволовыми клетками арганы, Beauty Style		Восстанавливающая смягчающая маска с биоцеллюлозой	
<b>ДЛЯ ВОЛОС</b>  выпадение, улучшение роста волос	Шампунь против выпадения волос с биотином KATIVA		Концентрат против выпадения волос с биотином в ампулах KATIVA	
<b>ДЛЯ ТЕЛА</b>  антицеллюлит, профилактика варикоза	Роскошный скраб для тела с цветами апельсина или роскошный скраб для тела с дамасской розой		Комплекс антицеллюлитных эфирных масел для коррекции фигуры	

# ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT118

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- Сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора
- Злокачественные новообразования
- Кровотечения и нарушения свертываемости крови
- Выраженные формы купероза (сетка расширенных красных сосудов на лице)
- Гирсутизм (нежелательный избыточный рост волос на лице)
- Индивидуальная непереносимость токов
- Нарушения кожной чувствительности
- Беременность
- Эпилепсия
- Наличие электронных или металлических подкожных имплантатов в области воздействия



# ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 BT118

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### МОДЕЛЬ

импульсный массажер Gezatone Biolift4 BT118

Артикул - 1303103

### ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

импульсный с высокочастотным заполнением

### ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ

100Гц

### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ

60 мкс

### ЧАСТОТА ВЧ ЗАПОЛНЕНИЯ

120 кГц

### СРЕДНИЙ ВЫХОДНОЙ ТОК, НЕ БОЛЕЕ

200 мкА

### ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

не более 45 кВ

### РЕЖИМ РАБОТЫ

непродолжительный

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

сеть ас 220 в, 50Гц

### ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

не более 10 Вт



# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>