



АППАРАТ ДЛЯ  
БЕЗОПЕРАЦИОННОГО  
RF-ЛИФТИНГА КОЖИ В  
ОБЛАСТИ ВОКРУГ  
ГЛАЗ  
ME ILUMINAGE

mē™

iluminage

## ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Прибор для коррекции возрастных изменений и улучшения состояния кожи ILLUMINAGE ME, основан на функциях **РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (RF)** и **ХРОМОТЕРАПИИ КРАСНОГО ЦВЕТА**, а в сочетании с ультразвуковой вибрацией и бережным нагреванием, делают возможным проводить процедуры профессионального косметического ухода, не выходя из дома.



## ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН ILUMINAGE СОЗДАЛ УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ В ДЕНЬ ДОБИТЬСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:




РАЗГЛАДИТЬ МОРЩИНКИ ВОКРУГ ГЛАЗ И  
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ «ГУСИНЫХ ЛАПОК»

УСТРАНИТЬ ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ  
И ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ

УЛУЧШИТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ,  
ВНЕШНИЙ ВИД И ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ




## ПОЧЕМУ СТАРЕЕТ КОЖА

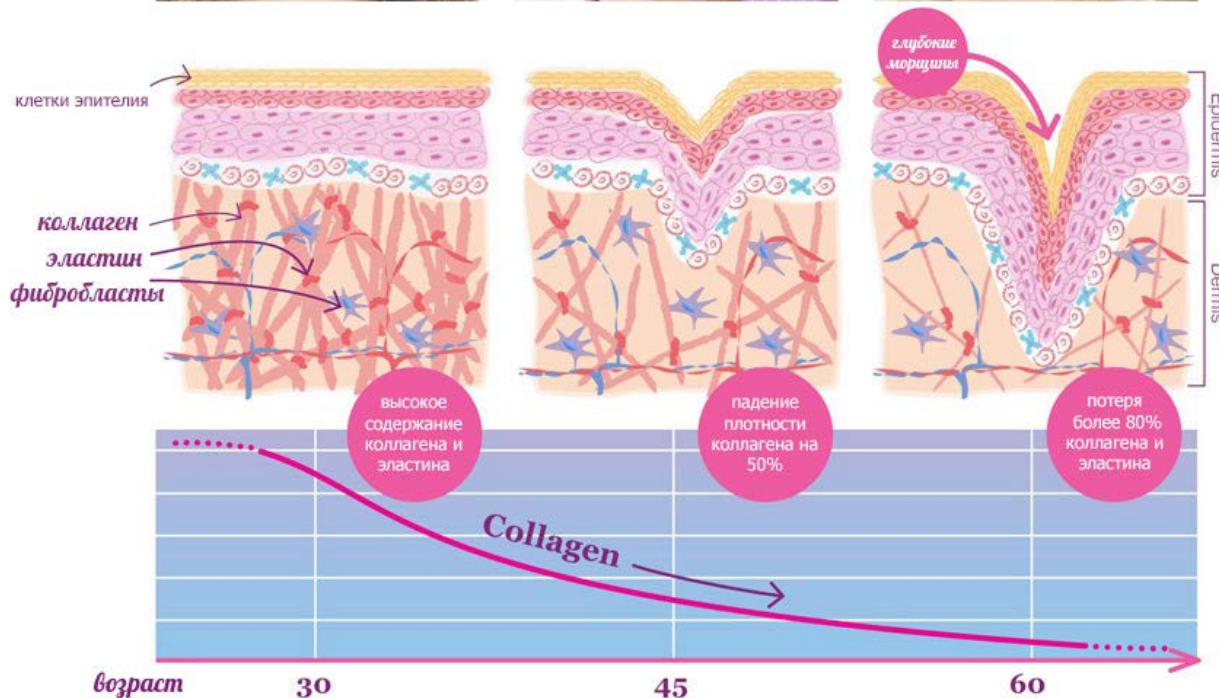

- ✓ Расстройство микроциркуляции приводит к ухудшению цвета лица.
- ✓ Снижается способность кожи удерживать влагу, снижается количество гиалуроновой кислоты.
- ✓ Снижается количество коллагеновых и эластиновых волокон.
- ✓ Становится более хаотичным их расположение, замедляется процесс их восстановления.
- ✓ Кожа теряет упругость и эластичность.

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА


**РАДИОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ** - Это запатентованная методика подтяжки лица, основанная на воздействии на кожу радиоволн определенной частоты. В результате такого воздействия происходит локальное нагревание ткани, которое стимулирует обменные процессы, восстанавливает деформированные волокна коллагена и стимулирует выработку новых.

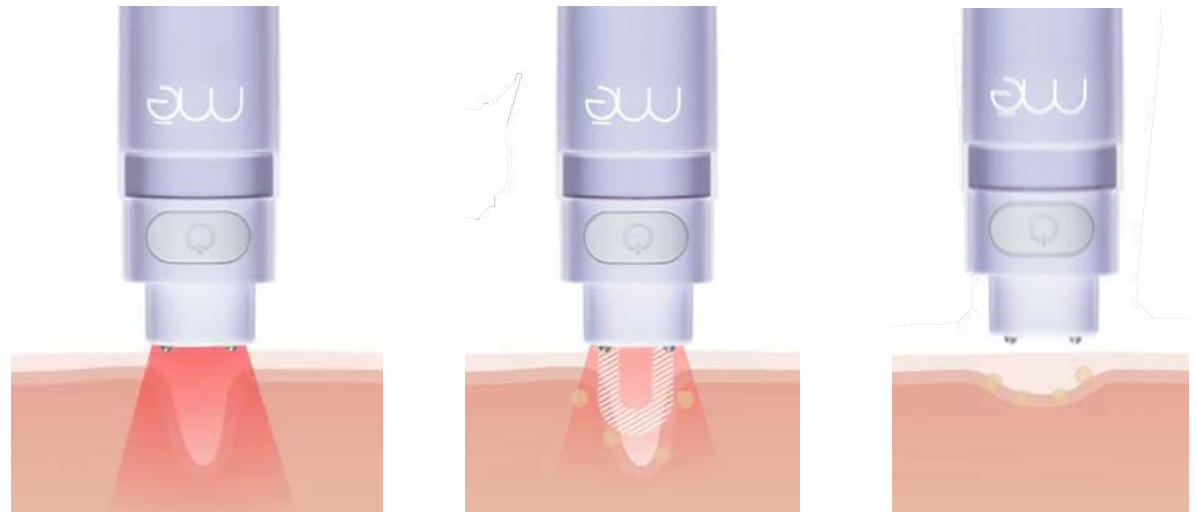

**РЕЗУЛЬТАТ:** кожа выглядит гладкой, упругой, количество и глубина морщин сокращается.

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА

**ХРОМОТЕРАПИЯ КРАСНОГО ЦВЕТА** в течение многих лет широко используется дерматологами и специалистами по уходу за кожей из-за своего омолаживающего эффекта. Было доказано, что особая длина волн красного света, используемого в устройстве ILUMINAGE Me, способствуют обновлению клеток и увлажнению кожи для улучшения тонуса и текстуры кожи. Все это позволяет добиться значительного омолаживающего эффекта.

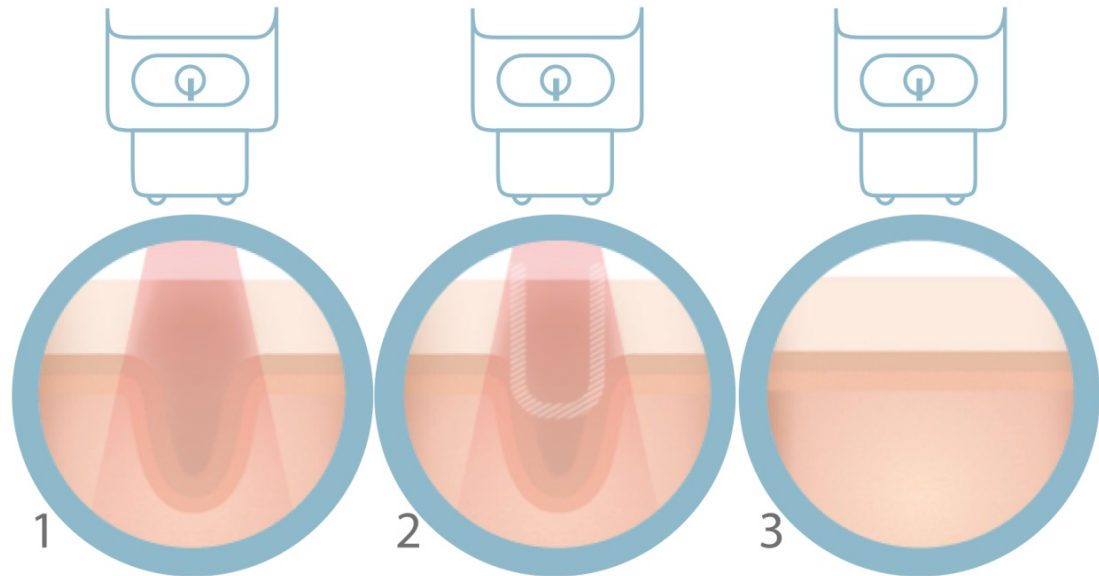

## ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

**Шаг 1:** Подготовка кожи. Перед использованием устройства очистите кожу, чтобы удалить все косметические средства и загрязнения.

Условно разделите лицо на шесть зон по 3 с каждой стороны лица  
кожа вокруг глаз, щеки и скулы

**Шаг 2:** Нанесите на кожу лица и зону вокруг глаз Контактный гель Beauty Style для процедуры лазерной и RF коррекции кожи

**ШАГ 3:** Включите устройство Нажмите серую кнопку питания на лицевой стороне устройства. Кнопка питания загорится, указывая на то, что устройство готово к использованию.

**Шаг 4:** обработайте область кожи вокруг первого глаза  
Проведите устройством над обрабатываемой областью кожи так, чтобы головка аппликатора полностью соприкасалась с кожей.  
Обработайте участок кожи в течение 3 минут.

При использовании прибора следите, чтобы прибор не оставался неподвижно на одном месте. Медленно и непрерывно водите прибором по лицу.



## ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

**Шаг 5:** повторите эту процедуру для другого глаза  
Устройство завибрирует, указывая на то, что пора переходить к другому участку лица.

**ШАГ 6:** Переместите устройство и повторите действия, описанные в шаге 4 на других участках лица.

**Шаг 7:** завершение обработки. Раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о завершении обработки.  
Устройство будет выключено автоматически.

Снимите с лица остатки контактного геля и нанесите на лицо маску экспресс ухода (по необходимости)

- Пользуйтесь устройством ILUMINAGE Me для обработки кожи в течение 3 –х минут в день на каждом участке.
- Общее время не должно превышать 20 минут в день.
- Повторяйте 5 дней в неделю, на протяжении 8 недель.
- По истечении 8 недель пользуйтесь устройством ILUMINAGE Me 2-3 раза в неделю для поддержания результатов.





## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Вы почувствуете мягкое ощущение тепла вместе с легкой вибрацией на коже, которое, по словам некоторых пользователей, действует успокаивающе. Многие пользователи ощущают увеличение гидратации кожи и повышение упругости уже при первом использовании устройства.

74%

После 1 недели обработки, 74% пользователей увидели улучшенную гидратацию, повышение гладкости и улучшение состояния кожи.

88%

После 4-х недель обработки, 88% пользователей наблюдали увеличение упругости кожи вокруг глаз и на других участках кожи.

93%

После 8-и недель обработки, 93% пользователей увидели общее улучшение внешнего вида кожи по сравнению с ее состоянием до начала обработки.

Это включает в себя улучшение здорового цвета лица и тона кожи, вида кожи, уменьшение морщинок и морщин, повышение эластичности кожи.

## ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Стильный дизайн и компактный размер делает прибор ILUMINAGE Me незаменимым предметом на туалетном столике каждой женщины.
- Безопасный и эффективный для всех типов кожи.
- Всего несколько минут в день, чтобы увидеть эффекты омоложения вашей кожи
- Устройство ILUMINAGE Me включается одним нажатием кнопки питания.
- Датчик контакта с кожей на рабочей поверхности активирует устройство только тогда, когда оно соприкасается с кожей.
- Непрерывный режим позволяет производить обработку всей поверхности кожи лица.
- Встроенный датчик температуры контролирует температуру обрабатываемой поверхности и выключает устройство при перегреве обрабатывающей головки.
- Функция смарт-отключения автоматически выключает устройство, если оно не находится в контакте с кожей в течение 20 секунд.
- Компактный размер и встроенный аккумулятор позволят проводить процедуры не только дома, но и в путешествии.
- Одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. (Сертификат FDA)



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ



Мицеллярная вода  
«Комфорт» для  
снятия макияжа,  
Beauty Style.  
арт. 4515800

### ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ



Контактный гель для  
процедуры лазерной и  
RF- коррекции кожи,  
130 мл Beauty Style  
арт. 4515500

### ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ




Крем восстанавливающий  
защитный после процедуры  
лазерной и RF коррекции  
кожи, 130 мл Beauty Style  
арт. 4515501



Маска для глаз  
омолаживающая Beauty  
Style с биоцеллюлозой  
арт. 4515433

## ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

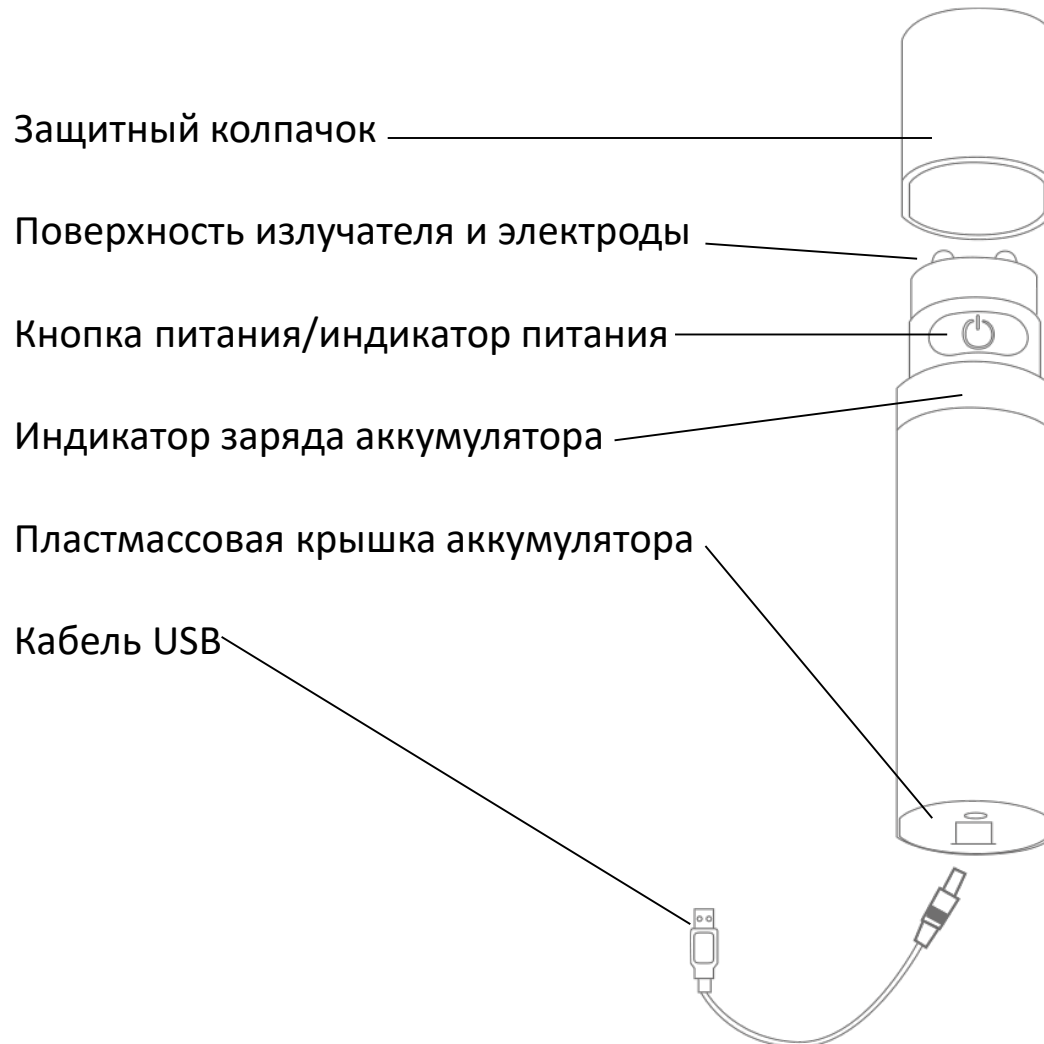



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Выходные параметры зарядного устройства  
(в комплект не входит):** DC 5,0 В, 0,5 А

Литийионная перезаряжаемая аккумуляторная батарея,  
одноячейная, 3,7 В, 2200 мА/ч

**Эксплуатация и хранение между сеансами:**

Температура окружающей среды: 5 ... 40 °С

Относительная влажность:

15% – 93%, без конденсата; 700–1060 гПа

**Транспортировка и хранение:**

Температура окружающей среды:

0 ... 60 °С;

относительная влажность:

10% – 90%, без конденсата; 700–1060 гПа

iluminage mē™



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

 <http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>

 <https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://vk.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>