



GÉZATONE

**GÉZATONE**

ПРИБОР  
ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ  
С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

MD-3a 933

# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## ЧТО ТАКОЕ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ

Микродермабразия это безболезненный метод удаления омертвевших клеток эпидермиса. Относится к категории механических пилингов и является прекрасной альтернативой лазерному или химическому пилингу. Основным преимуществом которого является отсутствие восстановительного периода после процедуры.

**Процедура микродермабразии оказывает множество эффектов:**

- осветляет пигментные пятна и выравнивает цвет лица;
- ускоряет процессы регенерации клеток кожи;
- способствует уменьшению глубины морщин;
- улучшает кровообращение и повышает тонус кожи,
- борется со шрамами и рубцами постакне;
- улучшает общий внешний вид кожи, делая ее более гладкой и эластичной.
- является эффективной профилактикой преждевременного старения кожи лица, шеи и зоны декольте.



# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- В приборе MD-3a 933 МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ от компании Gezatone используется дермабразия на основе сменных насадок с сапфировым напылением и непрерывным всасыванием.
- Прибор оснащен **тремя** абразивными насадками с сапфировым напылением для обработки различных областей лица и тела и **одной** роликовой насадкой для омолаживающих лимфодренажных процедур.




- Возможность регулировки одного из 3 -х уровней всасывания в зависимости от типа кожи проводить процедуры с разной интенсивностью и на различных участках лица и тела.
- Прибор является портативным, работает от встроенного аккумулятора, легко заряжается и может быть использован в любом месте.
- Сменные фильтры обеспечивают оптимальную работу прибора.
- Прибор универсален - подходит для всех типов кожи.
- Отличная альтернатива салонным процедурам.



# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

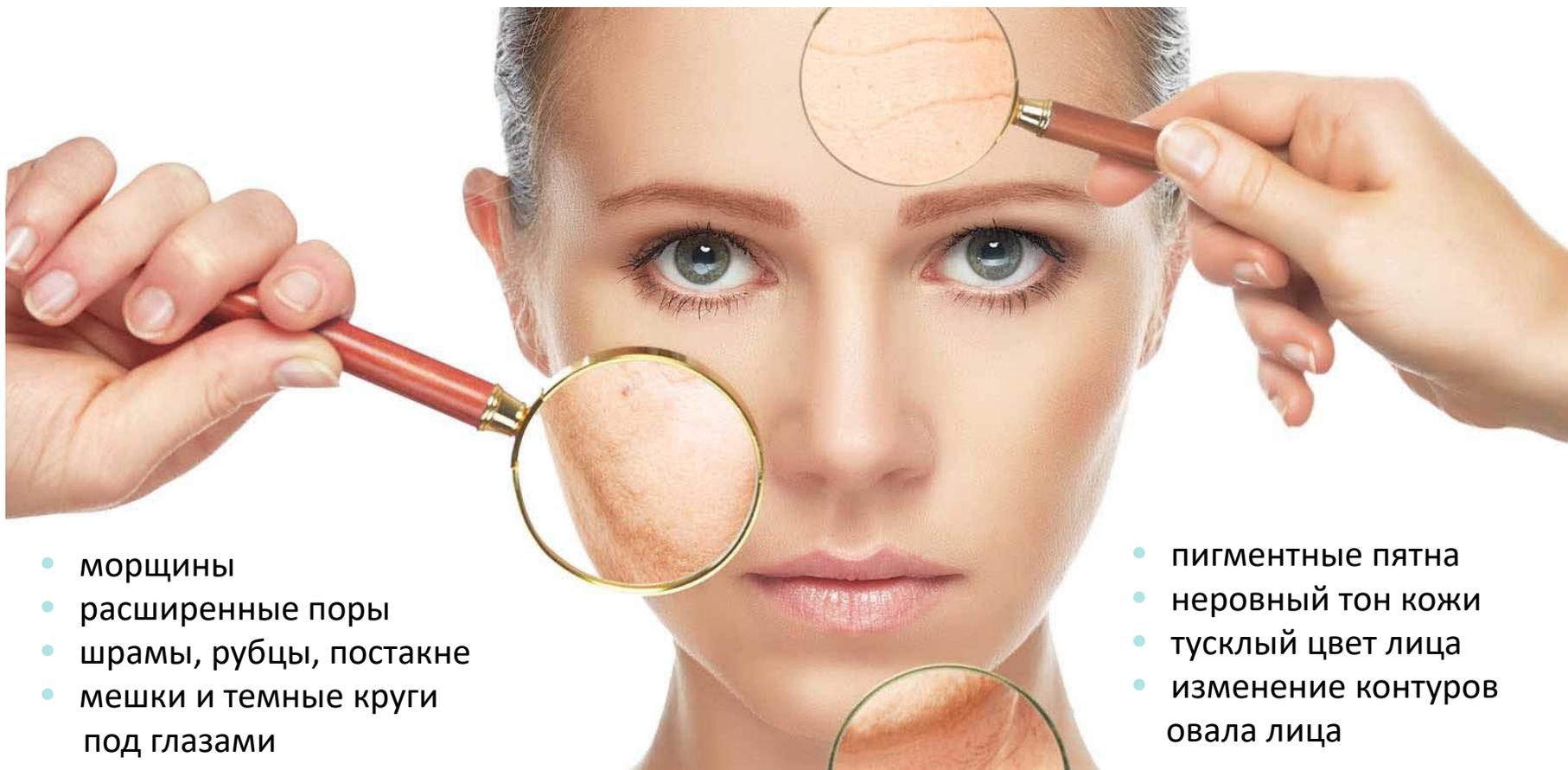

- морщины
- расширенные поры
- шрамы, рубцы, постакне
- мешки и темные круги под глазами

- пигментные пятна
- неровный тон кожи
- тусклый цвет лица
- изменение контуров овала лица

# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

«ПРОТЕСТИРОВАНО ПОД ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ»




Женщин, которые использовали устройство признались, что прибор прост в использовании и более эффективен, чем скраб.



Обнаружили, что этот прибор способен уменьшать несовершенства и избавляет от черных точек.



Из них считают, что их кожа стала более гладкой и выглядит лучше.

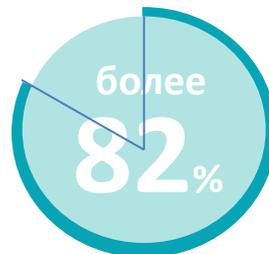

Женщин, которые использовали устройство заметили, что количество морщин сократилось, стали незаметными пигментные пятна и признаки усталости.

Результаты получены после тестирования, проведенного на 25 женщинах в возрасте от 30 до 60 лет, после использования устройства два раза в неделю в течение 28 дней

# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Точечная насадка с тонким сапфировым покрытием, подходящая для точной обработки небольших областей (например, в области носа и кожи вокруг глаз)
2. Крупная насадка с более грубым сапфировым покрытием, подходящая для интенсивного воздействия на проблемные участки кожи.
3. Большая насадка с тонким сапфировым покрытием, подходящая для чувствительной кожи
4. Роликовая насадка для омолаживающих процедур, уменьшения морщин и гусиных лапок. Используется в режиме МАССАЖ, комфортно воздействуя на кожу.
5. Кнопка питания включения/выключения питания.
6. Индикатор зарядки и индикатор 3-х уровней интенсивности.
7. База зарядного устройства.
8. Разъем на базе для подсоединения шнура адаптера питания (зарядного устройства).
9. Разъем на приборе для подсоединения шнура адаптера питания (зарядного устройства) или для подсоединения к базе.



# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ




## ДВЕ МЕТОДИКИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ

### ПИЛИНГ КОЖИ

- ✓ Безболезненно
- ✓ Безопасно
- ✓ Альтернатива химическим пилингам и шлифовке
- ✓ Усиление процессов регенерации
- ✓ Повышение проникновения косметических средств

### ВАКУУМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- ✓ Повышает тонус и эластичность кожи
- ✓ Не растягивает кожу
- ✓ Не повреждает сосуды
- ✓ Оптимальная сила вакуумного воздействия
- ✓ Усиление микроциркуляции
- ✓ Улучшение цвета лица

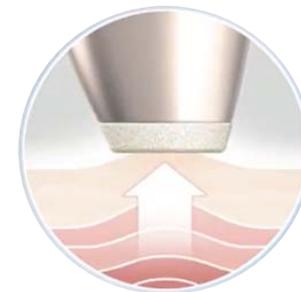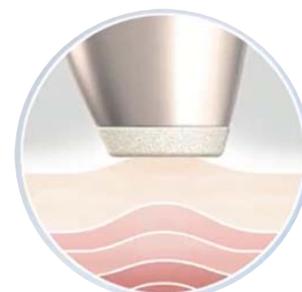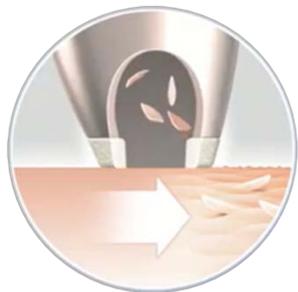

**РЕЗУЛЬТАТ : НЕЖНАЯ, ГЛАДКАЯ, УПРУГАЯ, ЭЛАСТИЧНАЯ КОЖА**

# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

### ПРОФИЛАКТИКА УГРЕВОЙ СЫПИ

- Регулярный пилинг предотвращает скопление кожного сала в порах и на поверхности кожи, что препятствует развитию воспалений.
- Микродермабразия с сапфировым напылением стимулирует обмен веществ, удаляя ороговевшие чешуйки, ускоряя процессы регенерации клеток кожи.
- После очищения кожа гораздо эффективнее усваивает активные ингредиенты косметики, которая улучшает состояние кожи.

### УХОД ЗА ВЯЛОЙ АТОНИЧНОЙ КОЖЕЙ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

- Применение микродермабразии с сапфировым напылением позволяет повысить выработку коллагена и эластина, что приводит к тонизации и повышению упругости кожи, разглаживанию морщин.
- Благодаря нежному отшелушиванию ороговевших частичек, кожа выглядит более свежей и молодой, гладкой и свежей.
- Для усиления омолаживающего эффекта необходимо после процедуры пилинга нанести сыворотку, крем или маску от морщин, активные компоненты которых будут гораздо лучше усваиваться.



# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ



- 1** **ДЕМАКИАЖ.**  
Очистите лицо от макияжа и загрязнений, используйте молочко или пенку для снятия макияжа. Завершите очищение с помощью лосьона тоника

- 2** Обязательное условие при использовании прибора: кожа лица, шеи или зоны декольте в месте воздействия должна быть натянута. Для этого необходимо пальцами свободной руки потянуть кожу в сторону противоположную направлению движения прибора.



- 3** **ЛОБ.**  
Медленно ведите прибор от центра лба к периферии. Каждый участок может быть обработан только один раз.



- 4** **ЩЕКИ.**  
Ведите устройство по щекам из центра к периферии.



- 5** **ВИСКИ**  
Медленно ведите прибор по коже в сторону начала роста волос. Повторите на каждой стороне по 1 разу. Держите прибор минимум в 1 см от глаз.



- 6** **ОБЛАСТЬ КОКРУГ РТА**  
Ведите прибор вдоль верхней губы от центра в стороны по очереди. От подбородка двигайтесь вверх. Не затрагивайте губы.



- 6** **НОС.**  
Медленно ведите прибор от основания носа вниз к его кончику. Затем повторите это на крыльях носа.



- 7** **ШЕЯ И ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ.**  
Медленно ведите устройство снизу вверх. Каждый участок может быть обработан только один раз.



- 8** **ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ**  
Нанесите на лицо и зону декольте успокаивающую или восстанавливающую маску. Время экспозиции 20 минут.

# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ



Пенка для демакияжа со стволовыми клетками органы, Beauty Style  
Артикул: 4515424



Увлажняющая пенка для демакияжа Аква 24, Beauty Style  
Артикул: 4515701



Мицелярная эмульсия для демакияжа "Матриксил" Beauty Style  
Артикул: 4515867A

### ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Шелковая восстанавливающая маска для лица Beauty Style с хитозаном.  
Артикул: 4501705



Маска для лица восстанавливающая Beauty Style с биоцеллюлозой  
Артикул: 4515431



Коллагеновая маска "Комфорт" с красным вином для чувствительной кожи, Beauty Style  
Артикул: 4515892

### ЗАЩИТА И ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ



CC крем «Комфорт» SPF 40, Beauty Style  
Артикул: 4515810



CC крем кушон. Beauty Style  
Артикул: 4515881/4515880




Солнцезащитная эмульсия SPF 20 Beauty Style  
Артикул: 4515845



# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Осветление кожи, уменьшение пигментных пятен.
- ✓ Избавление от мелких морщин, сокращение крупных морщин.
- ✓ Ускорение процессов регенерации клеток кожи.
- ✓ Профилактика акне (прыщи, воспаления).
- ✓ Уменьшение диаметра пор.
- ✓ Укрепление кожи лица, повышение эластичности.
- ✓ Выравнивание рельефа кожи, уменьшение рубцов и постакне.
- ✓ Улучшение тона, внешнего вида и цвета кожи.
- ✓ Активизация процессов синтеза

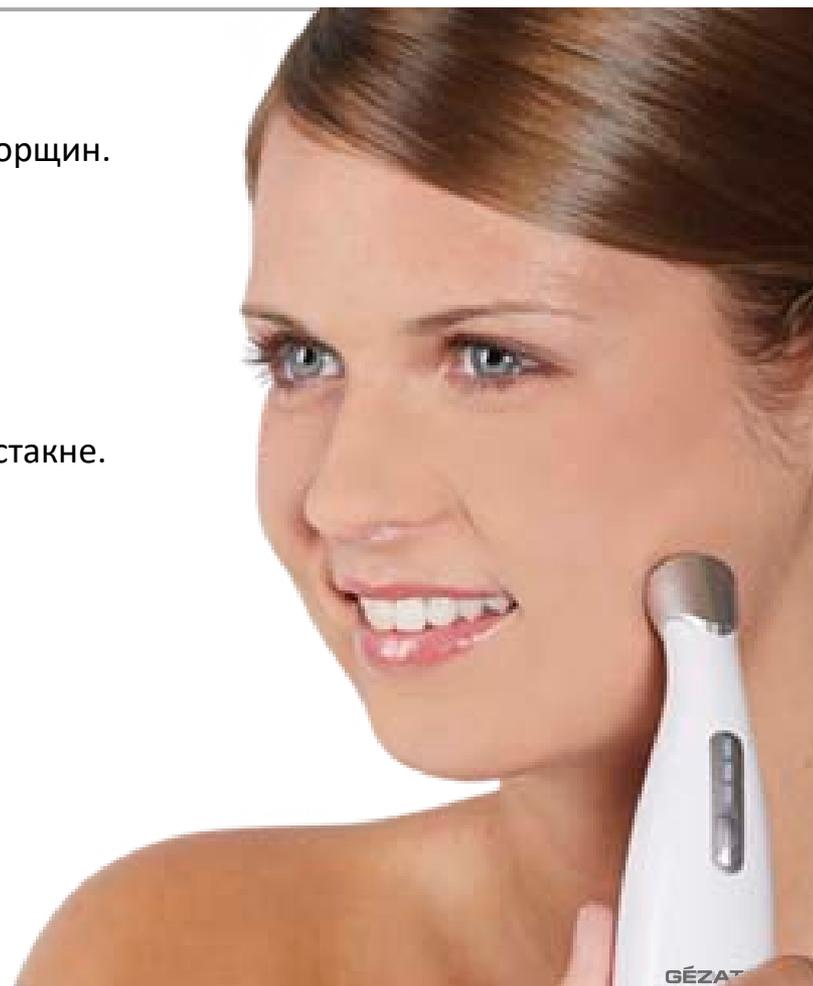

**GÉZATONE**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Процедуры лучше всего проводить в вечернее время, что бы утром насладиться свежей и сияющей кожей!
- Прежде чем приступить к использованию прибора, тщательно очистите лицо от загрязнений и макияжа. Протрите лицо влажным полотенцем, кожа не должна быть слишком сухой, но наносить какие-либо косметические средства не нужно
- Не используйте устройство чаще 1 раза в неделю.
- Сразу после использования обработанная кожа может слегка покраснеть.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не посещайте солярий, используйте солнцезащитный крем с SPF 50 непосредственно после процедуры и в течение ближайших 2-3 дней.
- Не посещайте сауну в течение 10-15 дней после процедуры.
- Чтобы избежать аллергической реакции на компоненты декоративной косметики, НЕ рекомендуем наносить макияж непосредственно после процедуры.



**GÉZATONE**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

# ПРИБОР ДЛЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ С САПФИРОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- На поврежденной коже
- На открытых ранах
- В области глаз и губ
- На любом другом участке тела, кроме лица
- При наличии кожных заболеваний  
(например: герпес, сосудистые заболевания или новообразования на коже)
- При раке кожи
- При раздражениях на коже
- Сразу после загара или при солнечном ожоге
- При употреблении лекарств, содержащих в составе стероиды
- При употреблении лекарств, разжижающих кровь
- При рассеянном склерозе, диабете или аутоиммунном расстройстве

# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>