

GÉZATONE

АППАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

**SUPER WET
CLEANER**

PRO

4 в 1



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Ни для кого не секрет, что любой уход за кожей лица начинается с очищения. Наша кожа постоянно подвергается воздействию внешних факторов, и для нормального функционирования ей необходима регулярная очистка.

Косметологи уверяют, что залог здоровья и красоты кожи - это регулярное очищение, и если же мы пренебрегаем рекомендациям косметологов, и не уделяем должного внимания очищению кожи, то можем столкнуться с такими нежелательными косметическими недостатками как:



- Жирная кожа с расширенными порами
- Увядающая кожа со сниженным тонусом
- Наличие ороговевших частичек
- Комедоны, черные точки, сальные пробки
- Обезвоженная кожа
- Шелушение
- Тусклый цвет лица
- Акне, прыщи, воспаления



ЭФФЕКТИВНЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Встречайте новый уникальный многофункциональный эффективный
Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Super Wet Cleaner PRO Gezatone.

Этот прибор станет вам незаменимым помощником в домашних процедурах по уходу за лицом если:

- Вы замечаете, что кожа стала более тусклой и безжизненной.
- Ваша кожа шелушится и выглядит неровной.
- Вам надоели комедоны, угревая сыпь и некрасивый жирный блеск кожи.
- Вы регулярно используете декоративную косметику.
- Вы хотите получать больше эффекта от косметических сывороток и кремов.
- Вы замечаете веснушки и пигментные пятна на коже.
- Вы хотите избавиться от мелких морщин и предотвратить увядание кожи.
- Хотите проводить косметические процедуры в домашних условиях и экономить на посещении салона красоты.

SUPER WET CLEANER

PRO



GÉZATONE

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Super Wet Cleaner PRO от Gezatone оснащен 4-мя насадками, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию.

Чистящая насадка — удобная мягкая губка используется для чистки лица со средством для умывания, подходит всех типов кожи, в том числе и для чувствительной. Деликатно очищает загрязнения и удаляет остатки макияжа.




Пилинговая насадка — мягкая щеточка (брашинг) для глубокого очищения и отшелушивания ороговевших частичек кожи. Используется для подготовки кожи перед чисткой пор.



Всасывающая насадка предназначена для удаления черных точек и угрей с помощью вакуума. Мягко удаляет загрязнения из пор, не травмируя кожу.




Насадка массажер используется для деликатного роликового массажа лица, улучшает кровообращение и поддерживает кожу в тонусе, способствует выведению лишней жидкости и снятию отеков.

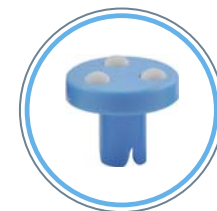

сеть фирменных магазинов


СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОР

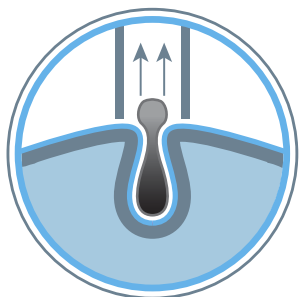

- Вакуумное очищение предотвращает скопление кожного сала в порах и на поверхности кожи, что препятствует развитию воспалений.
- Оптимальная сила вакуумного воздействия мягко очищает, не растягивает кожу и не повреждает сосуды.
- Вакуумный массаж воздействует на мышечный каркас, повышает тонус и эластичность кожи.

ДЕЛИКАТНЫЙ МАССАЖ

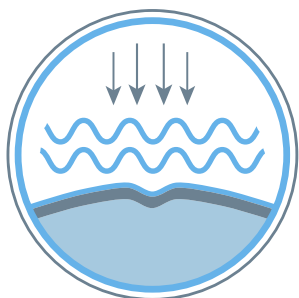

- Вращение насадок для очищения кожи не только способствует отшелушиванию ороговевших частичек и регенерации клеток кожи, но и оказывает мягкое массажное действие.
- После очищения кожа гораздо эффективнее усваивает активные компоненты косметики, которая улучшает состояние кожи.
- Использование специальной косметики уменьшает морщины, питает и увлажняет кожу.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

Увлажняющая пенка для демакияжа Beauty Style АКВА 24

*Для всех типов кожи, особенно для сухой
и обезвоженной*



ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ

Увлажняющий крем-пилинг Beauty Style АКВА 24

*Для всех типов кожи, особенно
для сухой и обезвоженной*



ДЛЯ МАССАЖА

Увлажняющий массажный крем для лица Beauty Style АКВА 24 (без масла)

*Легкий массажный крем без содержания масла для всех типов кожи.
Обеспечивает прекрасное скольжение во время процедуры массажа, не
закупоривает поры. Дарит коже ощущение комфорта*



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Незаменимый многофункциональный прибор для повседневного домашнего ухода.
- Обеспечивает салонный уход, не выходя из дома.
- Четыре насадки обеспечивают полноценный уход очищения, питания, омоложения.
- Три вида очищения, удаление загрязнений, отшелушивание ороговевших частичек и вакуумная чистка.
- Два вида массажа – вакуумный и роликовый.
- Водонепроницаемый корпус – позволяет использовать прибор в душе.
- Работает от батареек, что позволяет брать прибор с собой на дачу, в сауну или в путешествие.
- Удобная подставка для компактного хранения прибора и насадок в одном месте
- Великолепный результат при регулярном использовании, обеспечивает сочетание разнообразных насадок и косметических средств.
- Несколько минут процедур с аппаратом для очищения кожи 4 в 1 Super Wet Cleaner PRO от Gezatone и ваша кожа всегда будет гладкой, здоровой, упругой и эластичной.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте прибор при:

- Раздражении на коже или заболеваниях кожи (экзема, псориаз, дерматит)
- Беременности
- Куперозе
- Онкологических заболеваниях кожи
- Нарушении целостности кожных покровов
- Аллергических реакциях кожи, солнечных ожогах
- Проблемах с кровообращением, при диабете, туберкулезе, наличии опухолей, синяки и кровоподтеки или невралгия тройничного нерва.
- Наличии кардиостимулятора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Super Wet Cleaner PRO Gezatone.

Напряжение питания: DC 3 В., от батарей 2 x 1.5 В., тип АА (батарей в комплект не входят).

Ток потребления: не более 800 мА

Степень разрежения воздуха (вакуумный режим): 250 мм.рт.ст

Емкость контейнера для жидкости: 5 мл.

Габаритные размеры в упаковке: 170x225x102 мм.

Вес в упаковке: 0,35 кг

Производитель: «Gezanne I.T.C.» Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France / «Жезанн И.Т.С.», Сэнт Авертен, 39 рю де Гранж Галан, Франция.

Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК.», 2 фл, № 19, Лейн 160, САНГ-ЧИАНГ, РД, Тайбэй, Тайвань, К.Р. / 2 fl., № 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C.

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр.10, т.: (495) 225 25 83

Применение, дата производства: см. инструкцию по эксплуатации.

Срок службы: 5 лет



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 200-00-34 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti

Арт. 1301174

