



# SuperLifting

серии Bio Sonic, модель m356

ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  
С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ M356 GEZATONE


Многофункциональный косметический аппарат, о котором мы давно мечтали, теперь доступен для всех, кто хочет сохранить на долго красоту и молодость своего лица и проводить косметические процедуры в домашних условиях.

Компания Gezatone представляет ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА модель M356, сочетающий ЧЕТЫРЕ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТОДИКИ:

- 1** УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ – способствует проведению в глубокие слои кожи специальной косметики для увлажнения и питания клеток кожи.
- 2** ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ИОНОФОРЕЗ в сочетании с заряженными косметическими комплексами улучшит внешний вид и состояние кожи.
- 3** ХРОМОТЕРАПИЯ трех цветов комплексно воздействует на различные типы кожи, нормализует состояние жирной кожи, успокоит раздраженную кожу и запустит процессы выработки волокон коллагена и эластина увядающей кожи.
- 4** ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ в сочетании с УЗ-микромассажем подтянет и укрепит кожу, улучшит контур овала лица, снимет отеки, разгладит морщинки.



## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

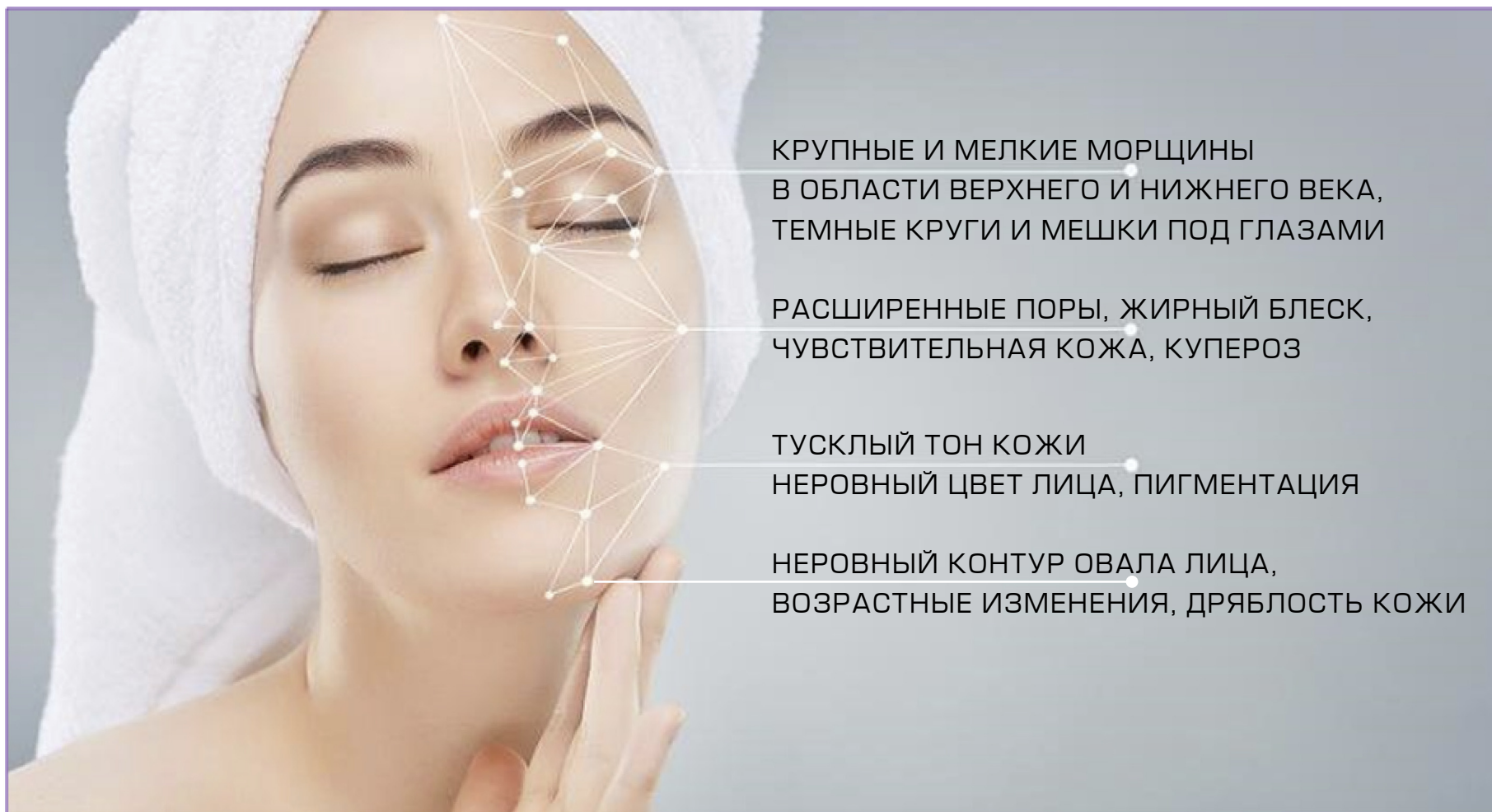

Аппарат рекомендуется для коррекции возрастных изменений кожи и позволит Вам осуществить в домашних условиях высокопрофессиональный уход за кожей с признаками увядания.

Регулярное выполнение простых и не занимающих много времени процедур позволит Вам многократно повысить упругость кожи, восстановить эластичность и тургор, улучшить цвет лица и разгладить морщины.

Аппарат компактен и удобен в использовании и станет Вашим надежным другом на долгие годы.

**ЭФФЕКТЫ ОТ РЕГУЛЯРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ M356 Gezatone**

- ✔ Максимальный эффект подтяжки кожи
- ✔ Разглаживание мелких мимических морщинок и морщин
- ✔ Эффективный массаж кожи
- ✔ Повышение тонуса и упругости кожи
- ✔ Эффективное очищение, питание и увлажнение кожи
- ✔ Уменьшение отечности
- ✔ Нормализация работы сальных желез
- ✔ Осветление пигментации и устранение темных кругов




## ФУНКЦИИ ПРИБОРА

### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ и МИКРОМАССАЖ

Ультразвуковые колебания с частотой  $\approx 3$  миллиона колебаний в секунду заставляют клетки дермы активно сжиматься и разжиматься с такой же частотой. Такое мягкое волнообразное воздействие ультразвука на ткани эффективно стимулирует и омолаживает кожу, не травмируя ее.

ФОНОФОРЕЗ – методика, обеспечивающая сочетание воздействия ультразвука и косметических препаратов. Благодаря ультразвуку проницаемость кожных покровов, клеточных мембран и стенок сосудов повышается, и активные вещества проникают глубоко в кожу.

- ✔ Мягко и деликатно стимулирует клетки кожи
- ✔ Способствует выработке собственного коллагена и эластина
- ✔ Усиливает микроциркуляцию крови и лимфы
- ✔ Устраняет отечность
- ✔ Подтягивает кожу, повышает упругость и эластичность
- ✔ Улучшает цвет лица
- ✔ Усиливает проникновение косметических средств и повышает их эффективность
- ✔ Разглаживает морщинки и неровности на коже

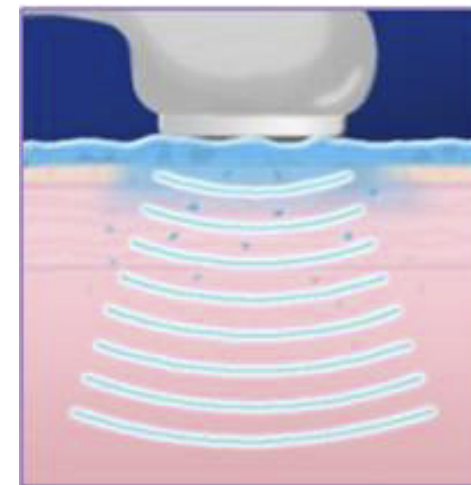

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА

### ИОНОФОРЕЗ




Применение постоянного гальванического тока регулирует обменные процессы, происходящие в коже, улучшает тонус кожи, нормализует деятельность сальных желез, усиливает питание кожи, ее влажность, способность к регенерации, а также стимулирует выработку белков коллагена и эластина клетками-фибробластами. При помощи постоянного гальванического тока можно проводить процедуру ионофореза, т.е. введения в глубокие слои кожи специальных заряженных косметических комплексов, что многократно усиливает их действие.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА "ION-" ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ:

- ✓ повышает тонус дряблой кожи;
- ✓ увлажняет кожу, восстанавливает ее тургор;
- ✓ активизирует тонус сосудов и улучшает цвет лица;
- ✓ стимулирует трофику тканей и кислородное дыхание клеток кожи;
- ✓ усиливает проникновение активных косметических средств в глубокие слои кожи.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА "ION+" ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ:

- ✓ снимает повышенный тонус мимических мышц лица
- ✓ разглаживает мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта;
- ✓ уменьшает раздражение и воспаление кожи;
- ✓ устраняет отеки и выводит токсины;
- ✓ снимает аллергические реакции, зуд, покраснения кожи;
- ✓ уменьшает проявления купероза, освежает кожу, способствует сужению пор;
- ✓ открывает кожные поры, расщепляет и омыляет кожный жир (себум), тем самым очищая кожу лица.

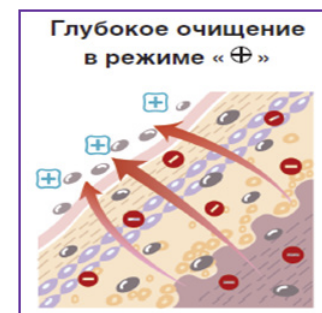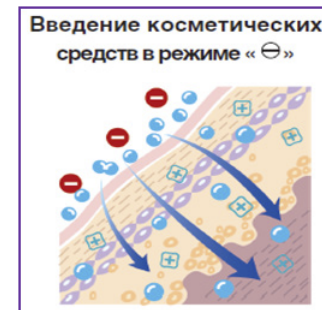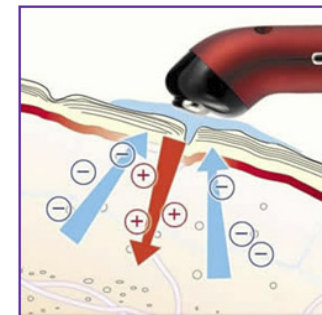

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА

**ХРОМОТЕРАПИЯ** – это бесконтактный метод лечения светом и цветом, эффективность которого научно доказана. Он основан на том, что свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет необходимую энергию клеткам кожи. Все цвета имеют свое излучение и оказывают различные эффекты.

**СВЕТ СИНЕГО СПЕКТРА** (460–470нм) оказывает успокаивающее действие и идеально подходит для ухода за чувствительной кожей. Способствует нормализации работы сальных желез, сужению расширенных пор. Предотвращает появления воспалений и акне. Свет синего спектра делает кожу красивой и сияющей здоровьем.



**СВЕТ КРАСНОГО СПЕКТРА** (620–630нм) достигает глубокие слои дермы, способен стимулировать выработку волокна коллагена и эластина. Улучшает кровообращение, уменьшает морщины и разглаживает кожу. Подходит для любого типа кожи.



**СВЕТ ЗЕЛЕНОВОГО СПЕКТРА** (580–590нм) идеально подходит для ухода за кожей смешанного типа. Свет зеленого спектра оказывает успокаивающее действие на кожу и снимает дискомфорт. Великолепно осветляет кожу с пигментацией, выравнивает тон кожи.



## ФУНКЦИИ ПРИБОРА

### МАССАЖ

Вибрационный массаж (6000–7000 колебаний в минуту) ускоряет процесс циркуляции крови и лимфоток. Снимает отеки и улучшает цвет лица. В сочетании с ультразвуковым микромассажем и хромотерапией при проведении курса процедур можно добиться великолепных результатов.



✓  
ТОНИЗАЦИЯ  
И ПОВЫШЕНИЕ  
УПРУГОСТИ КОЖИ



✓  
ПОДТЯЖКА  
И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,  
РАЗГЛАЖИВАНИЕ  
МОРЩИН



✓  
УСТРАНЕНИЕ  
«ВТОРОГО ПОДБОРОДКА»,  
ЧЕТКИЙ ОВАЛ ЛИЦА



✓  
УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА  
ПОР, ВЫРАВНИВАНИЕ  
КОЖНОГО РЕЛЬЕФА,  
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА




## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



### LCD ДИСПЛЕЙ

<b>Sonic</b>	Микромассаж
<b>Ion +</b>	Гальваническое воздействие в режиме плюс
<b>Ion -</b>	Гальваническое воздействие в режиме минус
<b>Massage</b>	Вибрационный массаж
<b>Photon</b>	Световое воздействие
<b>Time</b>	Время работы

### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

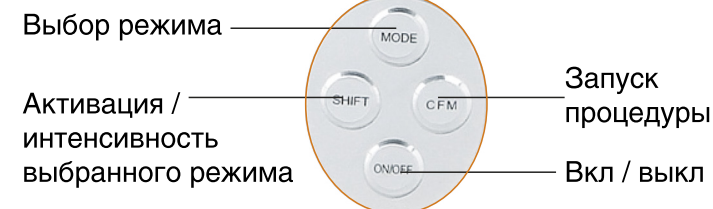

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФОНОФОРЕЗА



Концентраты для лица  
Beauty Style



Сыворотка для лица  
с коллагеном  
Beauty Style  
Арт. 4506003



Сыворотка для лица  
с гиалуроновой кислотой  
Beauty Style  
Арт. 4505010



Сыворотки для лица  
Beauty Style

### ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ BEAUTY STYLE



лифтинговый  
Арт. 4515004



омолаживающий  
Арт. 4515005



увлажняющий  
Арт. 4515003



противокуперозный  
Арт. 4515001

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА ПРОЦЕДУР БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ МЕТОДИК НЕ ТОЛЬКО ВЫ, НО И ВАШИ БЛИЗКИЕ ЗАМЕТЯТ, КАК ПОХОРОШЕЛО ВАШЕ ЛИЦО:

- ✓ произойдет лифтинг лица и шеи
- ✓ кожа станет более ровной, упругой и эластичной
- ✓ глубина и количество морщин уменьшатся
- ✓ активные компоненты специальных косметических средств проникнут в глубокие слои кожи, дадут полноценное питание и увлажнение
- ✓ контуры овала лица станут более четкими
- ✓ цвет лица улучшится, поры станут менее заметными
- ✓ кожные покровы очистятся от шлаков и токсинов



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ❑ ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ❑ ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ❑ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ❑ ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ОСОБЕННО ГНОЙНЫЕ)
- ❑ ОСТРЫЙ ПЕРИОД ТРАВМЫ, ССАДИНЫ, РАНЫ
- ❑ ОБОСТРЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ЭКЗЕМЫ, ДЕРМАТИТА, ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ КОЖИ, ТРЕЩИН)
- ❑ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
- ❑ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА И ИМПЛАНТАТЫ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ ПОД КОЖЕЙ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Наименование аппарата:**

Прибор для ухода и массажа лица Gezatone «Superlifting», модель m356 серия Bio Sonic, бытовой электрический

**Напряжение питания:** DC 15 В.

**Сетевой адаптер:** AC 220 В., 50 Гц./ DC15 В., 400 мА  
(или 800 мА)

**Диапазон рабочих температур:** +18...35°С при относительной влажности 20...80%

**Частота колебаний в режиме микромассажа:**  
3 МГц +/- 5%

**Длины волны светового излучения:** 620–630 нм, 460–470 нм, 580–590 нм.

**Частота колебаний в режиме механической вибрации:** 6–7 кГц

**Установки таймера:** 1–19 мин.

**Выходной ток в режиме ионофореза:** 0,35–0,9 мА (на нагрузке 1 кОм).

**Габариты в упаковке:** 238x228x68 мм

**Вес:** 750 г.

**Изготовитель:** «Gezanne I.T.C.» / «Жезанн И.Т.С.», адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, / Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция.

**Филиал завода-изготовителя:** «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК» адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, К.Р., Тайвань.

**Импортер/уполномоченная изготовителем организация:** ООО «Митридат», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр. 10 тел. (495) 225-25-83

Дата производства: см. на инструкции.

Срок службы 5 лет.





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 500-95-94 (звонок бесплатный)

[WWW.SOZV.RU](http://WWW.SOZV.RU)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 [odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](https://odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)

 [facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)

 [vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)

Арт. 1302091S

