

GÉZATONE

**ПОЯС
МИОСТИМУЛЯТОР
ABDOMINAL M11 PRO**

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



GEZATONE




ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO



Арт. 1301226

? ПРИ КАКИХ ПРОБЛЕМАХ


С ПОЯСОМ ABDOMINAL M11 GEZATONE PRO ДОБИТЬСЯ ПОДТЯНУТОГО ЖИВОТА И РЕЛЬЕФНЫХ МЫШЦ ПРЕССА НАМНОГО ПРОЩЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАНЯТИЯХ В СПОРТЗАЛЕ. ПРИБОР ПОМОГАЕТ ТРЕНИРОВАТЬ МЫШЦЫ ПРЕССА, СПОСОБСТВУЕТ ИХ УКРЕПЛЕНИЮ И ПОЗВОЛЯЕТ МОДЕЛИРОВАТЬ ФИГУРУ.

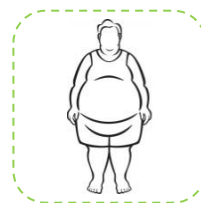

ИЗБЫТОЧНЫЙ ЖИР
В ОБЛАСТИ ЖИВОТА




СЛАБЫЕ МЫШЦЫ
БРЮШНОГО
ПРЕССА

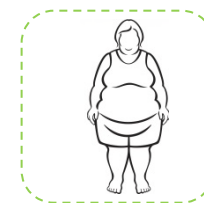

ИЗБЫТОЧНЫЕ ЖИРОВЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ НА БОКАХ



ИЗБЫТОЧНЫЙ
ЖИР НА ТАЛИИ

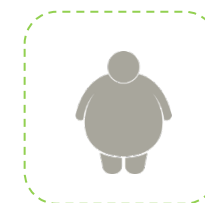

«ОБВИСШИЙ»
ЖИВОТ



ИЗБЫТОЧНЫЕ
ОБЪЕМЫ ТЕЛА

GÉZATONE



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР

ABDOMINAL M11 PRO



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

EMS + ПРОГРЕВ

EMS ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ – ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЫШЦЫ СЛАБЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ, КОТОРЫЕ СТИМУЛИРУЮТ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭМС ЭФФЕКТИВНА И БЕЗОПАСНА, БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРСАХ РЕАБИЛИТАЦИИ.

НАГРУЗКА МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНА К ЕСТЕСТВЕННОЙ, ПОВЫШАЕТ ТОНУС МЫШЦ И ИХ ВЫНОСЛИВОСТЬ.

ПРИ СОКРАЩЕНИИ МЫШЦЫ ПОТРЕБЛЯЮТ ЭНЕРГИЮ ИЗ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОКРАЩАЮТСЯ ОБЪЕМЫ, ВЫВОДИТСЯ ЛИШНЯЯ ЖИДКОСТЬ, УЛУЧШАЕТСЯ МЕТАБОЛИЗМ.

ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕГРУЗКИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА.



РЕЖИМ ПРОГРЕВА

УСИЛИВАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И СПОСОБСТВУЕТ СЖИГАНИЮ ЖИРА.

ПРИ МЕСТНОМ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ СКОРОСТЬ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 10%. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА ЭНЕРГИЯ, КОТОРУЮ ОРГАНИЗМ ПОЛУЧАЕТ ИЗ ЖИРОВЫХ ДЕПОЗИТОВ.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO



МЕТОДИКА EMS



ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ (EMS /ЭМС), МИОЛИФТИНГ

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА НЕРВНО - МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ.

Воздействие на группу мышц электрическими
импульсами , приводящее к их активному сокращению.

Различные частота и амплитуда импульсов позволяют
добиться укрепления и увеличения мышц.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭМС



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
И МЫШЦ



НАРАЩИВАНИЕ
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ



УСТРАНЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФИГУРЫ

ЭФФЕКТ ОТ ЭМС ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТКАНИ СЕРИЙ ИМПУЛЬСОВ, ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ С ПЕРИОДАМИ ПОКОЯ

Помимо возникающего сокращения, импульсные токи усиливают лимфо- и кровообращение, стимулируют обменные и трофические процессы, направленные на энергетическое обеспечение задействованных мышц.




GÉZATONE

.....

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР
ABDOMINAL M11 PRO

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

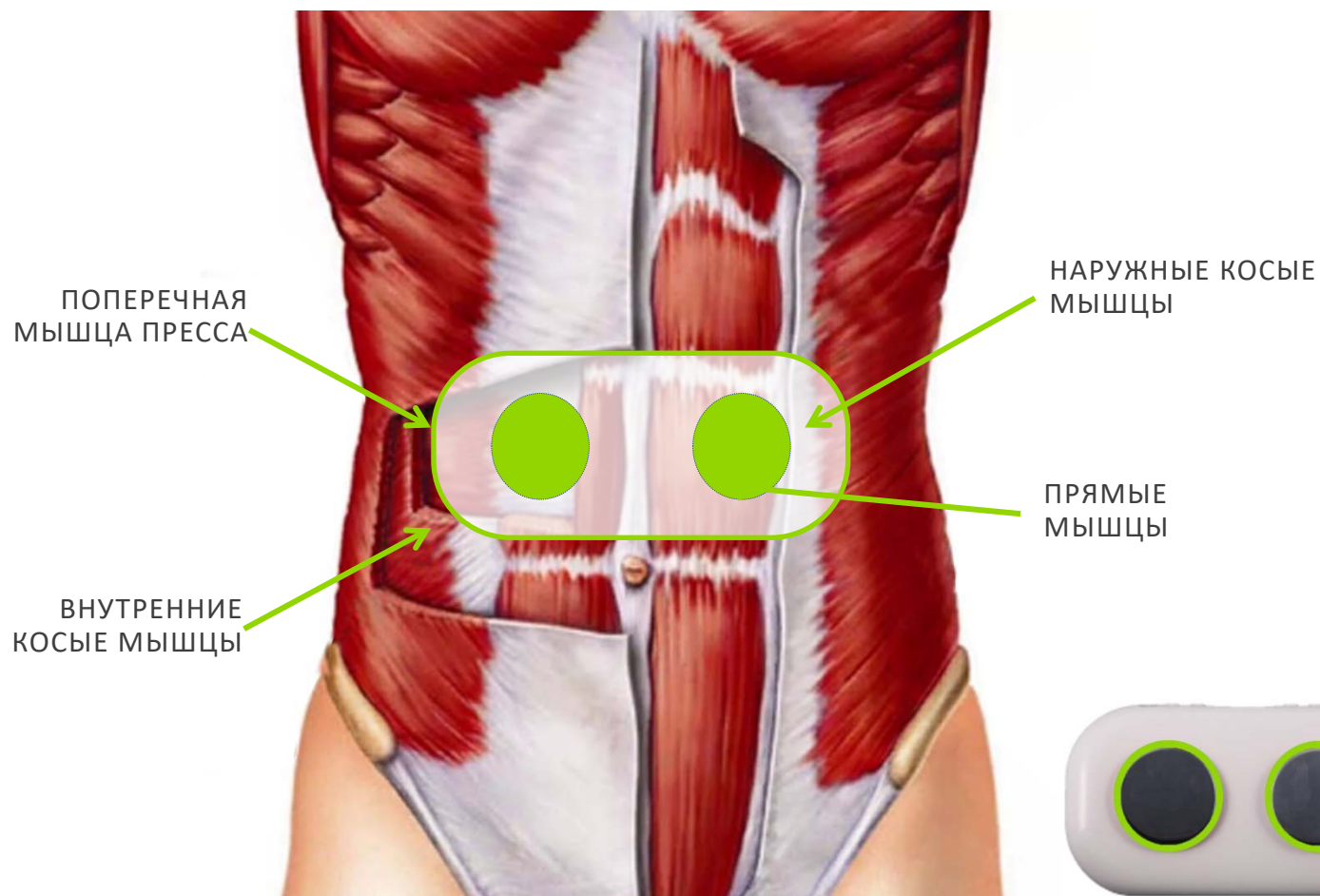



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO



Арт. 1301226

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- НЕ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КЛЕЯЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ
- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯГИВАНИЕ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА БЕЗ АКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
- 16 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА ВЫБОР
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ **РЕМЁНЬ**: ДЛЯ ЛЮБОЙ ТАЛИИ
- ДОСТУПНО ДВА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОМБИНИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ИМПУЛЬСНОГО МАССАЖА И УЛУЧШЕННЫЕ «МОНО» ПРОГРАММЫ, ВЫБИРАЕМЫЕ ВРУЧНУЮ.
- РАБОТАЕТ ОТ **ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА**
- БЕСПРОВОДНОЙ **ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** С ИНДИКАТОРОМ РЕЖИМА РАБОТЫ И ТАЙМЕРОМ
- ВСТРОЕННЫЙ **ТАЙМЕР КОНТРОЛИРУЕТ ВРЕМЯ** ТРЕНИРОВКИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ **ПРОГРЕВА**
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДОВ
- УСИЛЕННЫЙ **ЭФФЕКТ** В СОЧЕТАНИИ С УПРАЖНЕНИЯМИ ИЛИ ЗАНЯТИЯМИ В СПОРТЗАЛЕ
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА УПРАЖНЕНИЯХ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



УВЕЛИЧЕННЫЙ
ДИАМЕТР
ЭЛЕКТРОДОВ



6
ПРОГРАММ



ТАЙМЕР
В ПУЛЬТЕ ДУ



16 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ



СОЧЕТАНИЕ
ТЕПЛА И EMS



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO

1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 1
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПО КРУГУ РЕЖИМОВ 3, 4, 5



2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 2
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПО КРУГУ РЕЖИМОВ 4, 3, 6



ПРОГРАММЫ / РЕЖИМЫ

В АВТОМАТИЧЕСКИХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОГРАММАХ 1 И 2 РЕЖИМЫ 3,4,5 И 6 ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ КАЖДУЮ МИНУТУ ПО КРУГУ.

3




ИМИТАЦИЯ
РУЧНОГО МАССАЖА

4



ИМИТАЦИЯ
АКУПРЕССУРЫ

5

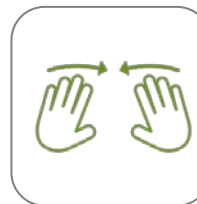

ИМИТАЦИЯ
РАЗМИНАНИЯ

6



ИМИТАЦИЯ
ПОСТУКИВАНИЯ

GÉZATONE

.....

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO





ПРОВОД USB
В КОМПЛЕКТЕ



ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА




ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

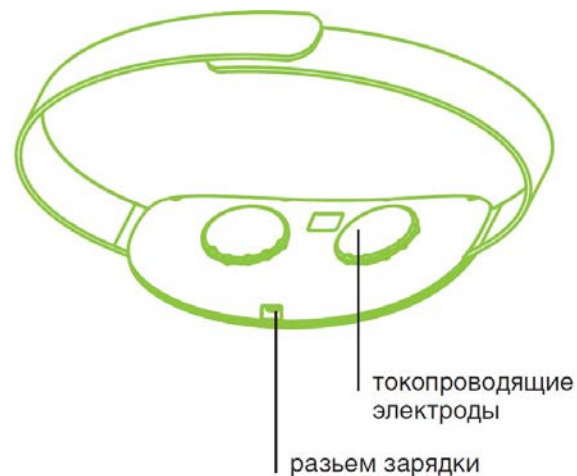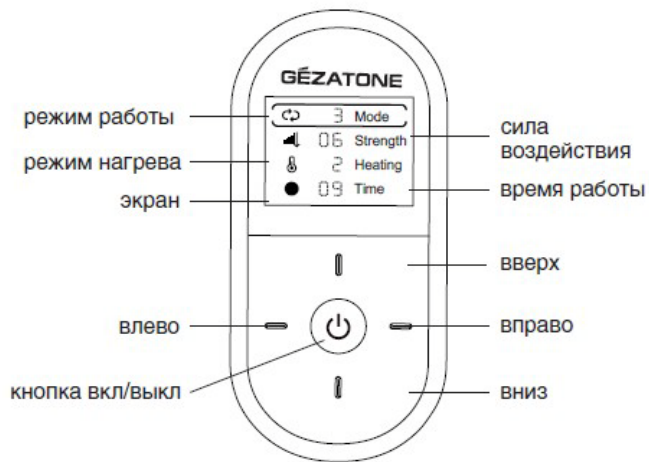



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO

СХЕМА УСТАНОВКИ БАТАРЕЙКИ В ПУЛЬТ ДУ

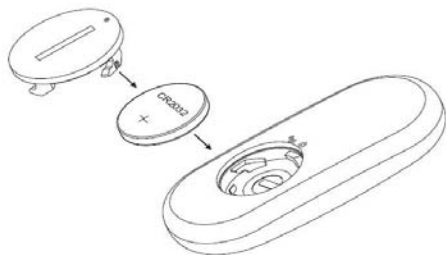

ВАЖНО

- В НАЧАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДИСКОМФОРТ.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С НИЗКОГО УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ УБРАТЬ ПИРСИНГ.

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ 1 МАССАЖ
- ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА 0 - УРОВЕНЬ
- СРЕДНИЙ ПОДОГРЕВ
- ТАЙМЕР НА 15 МИНУТ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПРОЦЕДУРА



НАЖМИТЕ КНОПКУ «ВКЛ/ВЫКЛ» НА ПУЛЬТЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА, ПУЛЬТ ДУ ПОДАСТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДСВЕТКА ЭКРАНА ЗАГОРИТСЯ, И ИНДИКАТОР НА КОРПУСЕ ПРИБОРА БУДЕТ МИГАТЬ. ПРИБОР ВКЛЮЧАЕТСЯ С НАСТРОЙКАМИ ПО УМОЛЧАНИЮ.



ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ **РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА** КНОПКАМИ «ВВЕРХ» И «ВНИЗ» ПУЛЬТА ВЫБЕРИТЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ «LEVEL», ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ «ВПРАВО», ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СИЛУ МАССАЖА, 1 НАЖАТИЕ = 1 УРОВЕНЬ



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ МАССАЖА НАЖМИТЕ «ВВЕРХ» ИЛИ «ВНИЗ», ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ МЕНЮ «MODE» - ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА МАССАЖА, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ «ВПРАВО» ИЛИ «ВЛЕВО».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ НАГРЕВА НАЖМИТЕ «ВВЕРХ» ИЛИ «ВНИЗ», ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ МЕНЮ «HEAT», ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ «ВПРАВО» ИЛИ «ВЛЕВО» ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ.



РЕГУЛИРОВКА ТАЙМЕРА НАЖМИТЕ «ВВЕРХ» ИЛИ «ВНИЗ», ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ «TIME», ЗАТЕМ НАЖМИТЕ «ВПРАВО» ИЛИ «ВЛЕВО» ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO

ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 1 – 2 РАЗА ЕЖЕДНЕВНО:
15 МИНУТ ИМПУЛЬСНОГО МАССАЖА И 30 МИНУТ РАЗОГРЕВАЮЩЕГО
МАССАЖА

НЕДЕЛЯ	ПОНЕДЕЛЬНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВЕРГ	ПЯТНИЦА	СУББОТА	ВОСКРЕСЕНЬЕ
1	МОЩНОСТЬ 3	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 2	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 4	МОЩНОСТЬ 4	МОЩНОСТЬ 4
2	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 4	МОЩНОСТЬ 4	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 8	МОЩНОСТЬ 8	МОЩНОСТЬ 8
3	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 9	МОЩНОСТЬ 9	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 9	МОЩНОСТЬ 10	МОЩНОСТЬ 10
4	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 9	МОЩНОСТЬ 9	ОТДЫХ	МОЩНОСТЬ 9	МОЩНОСТЬ 9	МОЩНОСТЬ 10



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА КОМБИНИРОВАТЬ ТРЕНИРОВКИ С ПРОГРАММОЙ КОРРЕКЦИИ КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ СЕРИЯ ПРЕПАРАТОВ «PHYTOSONIC» BEAUTY STYLE.

ОБЕРТЫВАНИЕ «PHYTOSONIC» РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ДНИ ОТДЫХА



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO

СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА

MODELLAGE



КРЕМ С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ
ДЛЯ ЖЕНЩИН «ПЛОСКИЙ
ЖИВОТ», арт. 4501815 – 200 мл

MODELLAGE



СРЕДСТВО ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН «SLIM EXPRESS»
арт. 4501812 - 200 мл



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
"ЦЕЛЛЮГЕЛЬ"
арт. 4501818 – 200 мл



ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
арт. 4504006 – 120 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОБЛЕМУ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ БОЛЕЕ
ВЫРАЖЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ПРОЦЕДУРА
ОБЕРТЫВАНИЯ
В «ДНИ ОТДЫХА»
МЕЖДУ
ПРОЦЕДУРАМИ С
АППАРАТОМ



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ САХАРНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА "PHYTONONIC"
арт. 4516201 - 200 мл



ОБЕРТЫВАНИЕ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЛЯ ТЕЛА
"PHYTONONIC"
арт. 4516205 - 500 мл



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА "PHYTONONIC"
арт. 4516207 - 100 мл



GÉZATONE



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO



Арт. 1301226

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВСЕГО 4 НЕДЕЛИ ТРЕНИРОВОК ПО 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ
МОГУТ ДАТЬ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ОБЪЕМЫ ЖИРОВОЙ ПРОСЛОЙКИ
УМЕНЬШАЮТСЯ, МЫШЦЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ПОДТЯНУТЫМИ И
РЕЛЬЕФНЫМИ.



РЕЗУЛЬТАТ ЗА
4 НЕДЕЛИ



УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ
ПРЕССА




УМЕНЬШАЕТ
ОБЪЕМЫ ТЕЛА



МОДЕЛИРУЕТ
ФИГУРУ



УБИРАЕТ
ЛИШНИЙ ЖИР

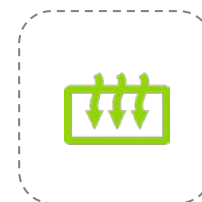

УСКОРЯЕТ
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

GÉZATONE



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ЭПИЛЕПСИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
- ПАТОЛОГИИ КРОВИ
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТАДИЯХ IIВ И III, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, НАРУШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- МИОМА
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

GÉZATONE



ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M11 PRO



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ПРИБОРА
- USB-КАБЕЛЬ
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: от встроенного аккумулятора 3.7 В, 2000 мАч
- ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА: DC 5 В, не менее 1000 мА (в комплект не входит), разъем USB, тип А
- БАТАРЕЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ: 3 В, тип CR2032
- ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ: 1Гц-1000Гц
- ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ВЫХОДНОГО ИМПУЛЬСА: до 25В (50мА)
- АМПЛИТУДА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ: до 150 В
- НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ: 500 Ом, допустимое отклонение $\pm 10\%$
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА: 38 С - 48°С
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: +5...40°С
- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ: не более 80%
- РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ: 260x124x73 мм
- ВЕС В УПАКОВКЕ: около 700 г



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

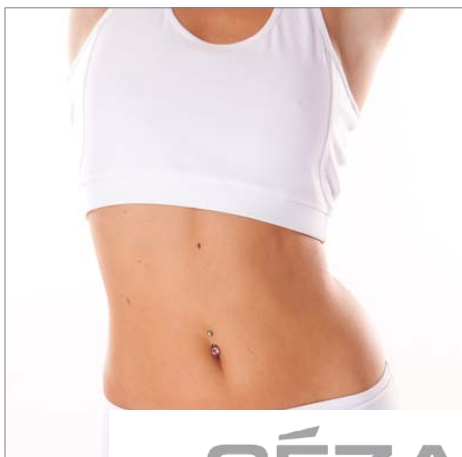

GEZATONE



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок
бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>