



КОМПЛЕКТ  
**ОМОЛАЖИВАЮЩИХ**  
КОМПРЕССИОННЫХ  
МАСОК

Арт. 102406

**GÉZATONE**

# ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Комплект омолаживающих компрессионных масок для Gezatone – новое поколение омолаживающих средств, предназначенных для ухода за увядающей кожей лица.

- У каждого человека после 45-40 лет наблюдается гравитационный птоз тканей.
- Птоз в переводе с греческого означает "опущение". Сегодня это замысловатое слово стало одним из ключевых в обсуждении вопросов красоты.
- Причины возникновения птоза.
- Косметологический птоз состоит из двух важных компонентов, влияющих на внешность: гравитация и возраст. Именно эти два фактора влияют на опущение тканей. Итак, гравитационный птоз – состояние, при котором под воздействием силы земного притяжения кожа и все структуры лица и тела провисают. В результате черты и контуры лица существенно деформируются. Это явление связано и с возрастными изменениями.
- В зеркале мы начинаем видеть опускающиеся уголки рта, появляющиеся носослезные борозды, складки кожи над глазами, мешки под глазами. Теряется былой овал лица. Первой стареет кожа вокруг глаз и появляются носогубные складки.
- Для коррекции овала лица и профилактики гравитационного птоза мы рекомендуем:

**Одним из самых доступных методов профилактики и коррекции возрастных недостатков и гравитационного птоза является применение ОМОЛАЖИВАЮЩИХ КОМПРЕССИОННЫХ МАСОК**

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ	2. АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
<ul style="list-style-type: none"><li>- Гимнастика для лица</li><li>- Массаж лица</li><li>- <b>Моделирующие маски</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- RF-лифтинг</li><li>- Микротоковая терапия</li><li>- Миостимуляция</li></ul>

# ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ

## ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ




**ОБЛАСТЬ  
ЛБА**



**ОБЛАСТЬ  
ЩЕК**



**ОБЛАСТЬ  
СКУЛ**

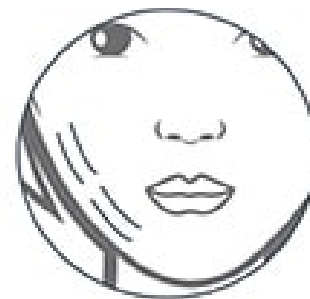

**ОБЛАСТЬ  
ПОДБОРОДКА**

КОМПЛЕКТ ИЗ 2-х МАСОК выполнен из специально разработанной эластичной ткани и позволяет зафиксировать лицо, с учетом анатомических особенностей. Первая маска устраняет морщины на лбу. Вторая представляет собой компресс, который крепится в области лба и подбородка с захватом области губ, устраняя мимические морщины. Эластичный тканевый компресс оказывает воздействие на мышечную структуру нашего лица.



# ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

---

- Комплект омолаживающих компрессионных масок Gezatone - это предмет индивидуального пользования, не рекомендуется делить ее с кем-то еще.
- Чтобы достичь максимальных результатов в кратчайшие сроки, используйте маски всякий раз, когда у Вас есть такая возможность. Применение маски во время просмотра фильма, чтения или выполнения любых домашних дел поддержит и освежит Вашу кожу, предотвратит ее обвисание и дряблость.
- Маски можно применять в качестве экспресс-метода «на выход». Всего пятнадцать минут в компрессионных масках освежат кожу лица, устраним признаки стресса, выровняют цвет лица и улучшат внешний вид кожи.
- Наиболее выраженные результаты дает регулярное применение масок во время сна.
- Омолаживающие маски предназначены для многократного применения. Маски можно промывать в прохладной воде без мыла и других моющих средств. Не рекомендуется отжимать маски, лучше всего сушить их на полотенце.
- Вы можете использовать Ваши обычные косметические средства непосредственно под маски. Рекомендуется наносить ночные косметические средства не позже, чем за час до сна, а непосредственно перед сном использовать маски.

# ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Маски не только помогут Вам избавиться от глубоких морщин, но и скорректировать овал лица, вернуть молодость, свежесть и здоровый вид кожи.
- Вы сможете без труда надеть её когда читаете, смотрите фильм или любимый сериал, занимаетесь домашними делами.
- Всего 15 минут и Ваша кожа снова сияет красотой и здоровьем, никаких признаков усталости и стресса – ровный
- и красивый тон лица.
- Компрессионный эффект помогает поработать с проблемами цвета лица, дряблости кожи.
- По своей структуре эти маски представляют собой материал высокой эластичности, он подобно «второй» коже покрывает Ваше лицо, при этом не доставляя проблем во время ночного сна
- И после утреннего пробуждения мы видим, что лицо приобрело сияющий цвет, кожа стала ровной и гладкой.
- Вместе с профессиональными косметологическими продуктами от компании Gezatone поддержать красоту и сохранить молодость на долгие годы, становится доступно всем!



# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

 <http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>

 <https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://vk.com/sozvezdiekrasoti>

 <http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>