



Εἰς τὴν ἀγορὰν τῆς ἰατρικῆς ἐπιπέδου

WATERPIK WP-112

www.waterpik-shop.ru

Εἰς τὸν ὀριζόντιο ἰσθμὸν τῆς ἐπιπέδου ἔκδοσης

Όι έάάθναεύι ύέ έδδεάαοι δ άέύ ιί έί ηδδ έδδ WaterPik 112

ΟΑΟΙ Ε×ΑΝΕΕΑ ΟΑΔΑΕΟΑΔΕΝΟΕΕΕ



Υέάεοδι ί έοαι έα: 220 Α
Άάάεί έα άί άύ 220 620 έί ά
1200 έι ί όέυηί ά ά ί έί όό.

Ι ΑΔΟ Ι ΔΑΑΤ ΝΟΤ ΔΤ ΑΕΙ Ι ΝΟΕ

Εί άάά Αύ έηί ί εύόόάά ύέάεοδδ-άηέά ί δεάί δύ, ί ηί άάί ί ί άηέέ άί ί δέ άί δά ί ί άό άί άδούηύ άάδδ, ί άί άοί άέι ί ηέάάί άαού ί ηί ί άί ύι ί άδαι ί δά άί ηοί δί άέ ί ηδδ.

Ι ΔΤ ×ΕΟΑΕΟΑ ΑΝΑ ΕΙ ΝΟΘΟΕΟΕΕ Ι ΑΔΑΑ ΕΝΙ Ι ΕΥΟΤ ΑΑΙ ΕΑΙ .

Ι ΔΑΑΤ ΝΟΑΔΑΑΕΑΙ ΕΑ:

×οί άύ ηί έçέού δέηέ ί ί δάάάί έύ ύέάεοδδ-άηέέι όί έί ί :

- Άηάάά ί δέέρ-άέόά ί δεάί δ ί δ ηάδδ ί ί ηέά έηί ί εύόι άάί έύ
- Ι ά οδι άάέόά ύέάεοδδ-άηέέέ οί όδ άέάάί ύι έ δέέαι έ.
- Ι ά ί ηόάάέύέόά ί δεάί δ δάι , ί δέόάά ί ί ί ί άό όί άηού έ ί ί ί άηού ά άί άό.
- Ι ά έηί ί εύόόέόά ί δεάί δ άί άδαι ύ ί δέί ύόέύ άάί ί.
- Ι ά ί ί άδóάέόά ί δεάί δ ά άί άό έέέ άδóάόρ άέάέί ηού.
- Ι ά οδι άάέόά ί δεάί δ, άηέέ ί ί όί άέ ά άί άό. Α ύοί ί ηέό-άά, άύέέρ-έόά άάί έç ηάδδ ί άί άέάί ί ί.

ΑΙ ΕΙ ΑΙ ΕΑ:

×οί άύ ηί έçέού δέηέ ί άέί άί ά, ύέάεοδδ-άηέί άί οί έά, άί çάί δαι έύ, ηάδύάç ί ύó ί ί άδάάάί έέ ί ύάέό όέάί άέ ί ί έί ηδδ έδδ:


- Ι ά έηί ί εύόόέόά ί δεάί δ, άηέέ ό ί άάί ί ί άδάάάί ί δί άί ά έέέ άέέέά, άηέέ ί ί ί ά δάί δάάδ άί έάί ύι ί άδάçί ί , άηέέ ί ί ί άάέ, άύέ ί ί άδάάάί έέέ ί ί άδóάέηύ ά έράόρ άέάέί ηού. Νάύάέδάνύ η ί δάάηόάάέδóέύι έ WaterPik Technologies.
- Ι δί έί ηόδóέδδδóέόά έ ί δέηί άδδέάάέόά çά άάδύι έ έ έρπύι έ η ί άδαι έ-άί ί ύι έ άί çί ί άέί ί ηόύι έ, +οί άύ ί ί έ ί ί εύόι άάέέηύ ί δεάί δί ί ί δάάέεύί ί.


- Не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос и другие части тела, для которых не предназначен прибор. Давление струи воды, производимое прибором, может нанести серьезный вред в этих участках тела. Изучите инструкцию по применению для правильного использования прибора.
- Используйте этот продукт только для тех целей, которые описаны в инструкциях, или так, как Вам рекомендует Ваш стоматолог.
- Используйте только те насадки и аксессуары, которые рекомендованы WaterPik Technologies.
- Не отделяйте эластичную насадку Pik Pocket от прозрачной части насадки. Если она отделилась по какой-то причине, выбросьте обе части насадки и впоследствии пользуйтесь новой насадкой Pik Pocket.
- Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскивающие или лечебные растворы), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ничем другим. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится.
- Не опускайте и не засовывайте посторонние предметы в прибор.
- Располагайте прибор и провод прибора вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте прибор там, где использовались аэрозольные спреи.
- Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие элементы.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не используйте, если у Вас в полости рта есть ювелирные украшения. Извлеките их перед применением.
- Не используйте прибор, если у Вас открытая рана на языке.
- Если доктор порекомендовал Вам принимать антибиотики перед процедурами по гигиене полости рта, обязательно проконсультируйтесь у Вашего стоматолога перед использованием прибора WaterPik, или любого другого устройства для гигиены полости рта.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок

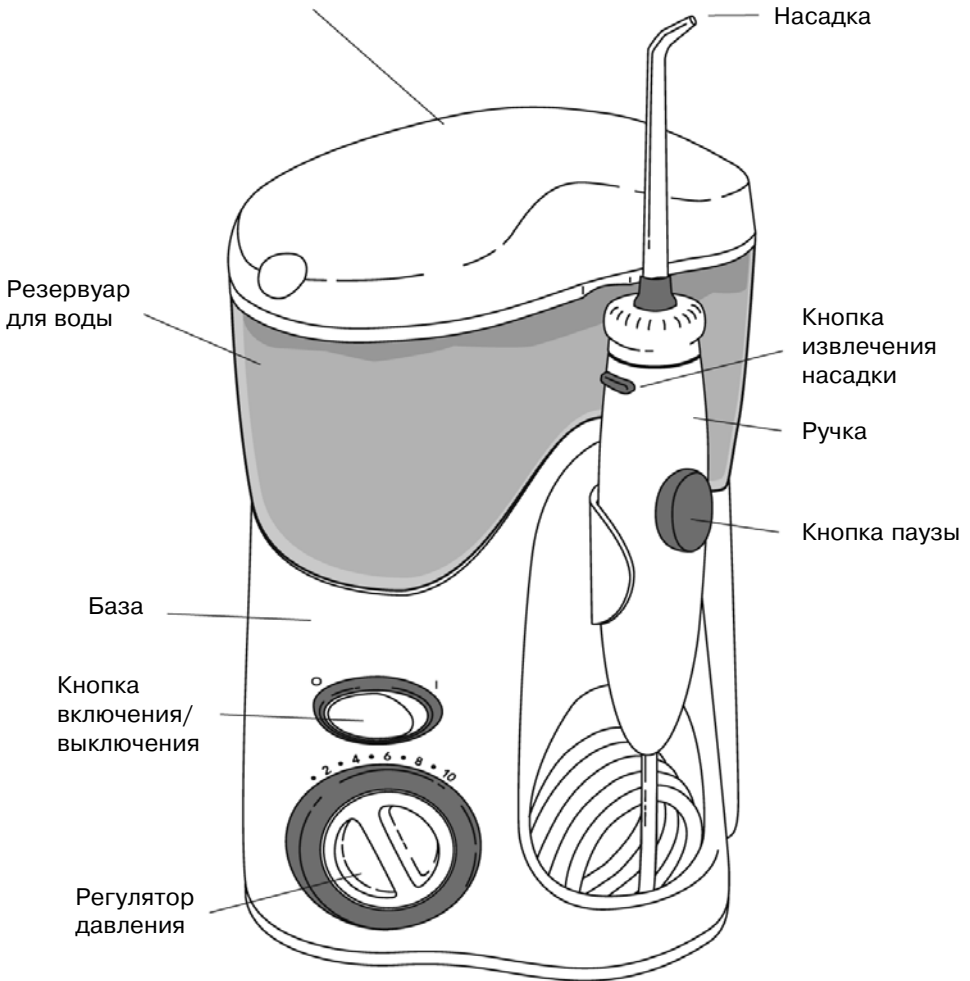

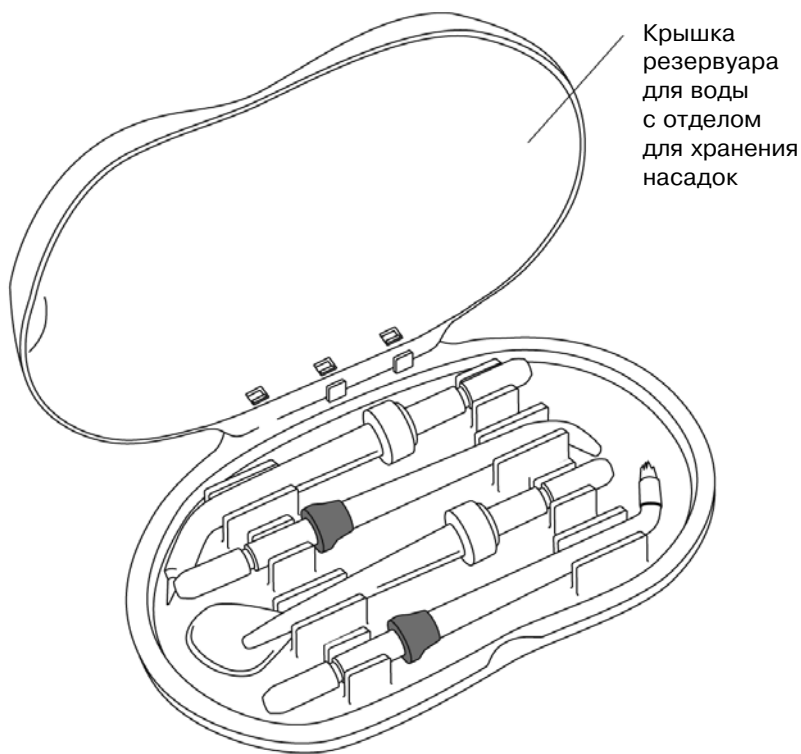


Крышка резервуара для воды с отделом для хранения насадок



Насадка стандартная



Насадка для чистки языка

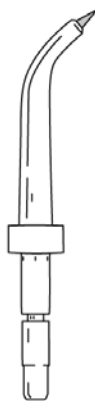

Насадка Pik Pocket (для чистки десневых карманов)



Ортодонтическая насадка (для чистки брекет-систем)

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Подключите прибор к электрической сети. Если розетка имеет выключатель, убедитесь что розетка включена.



Подготовка резервуара.

Достаньте резервуар с крышкой из базы. Заполните резервуар теплой водой. Расположите резервуар в базе, приложив небольшое равномерное усилие сверху.

Установка и снятие сменных насадок.

Вставьте насадку в отверстие на верхней поверхности ручки ирригатора. Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к ручке, если насадка установлена правильно.

Для извлечения насадки нажмите кнопку извлечения насадки и потяните насадку на себя из ручки ирригатора.

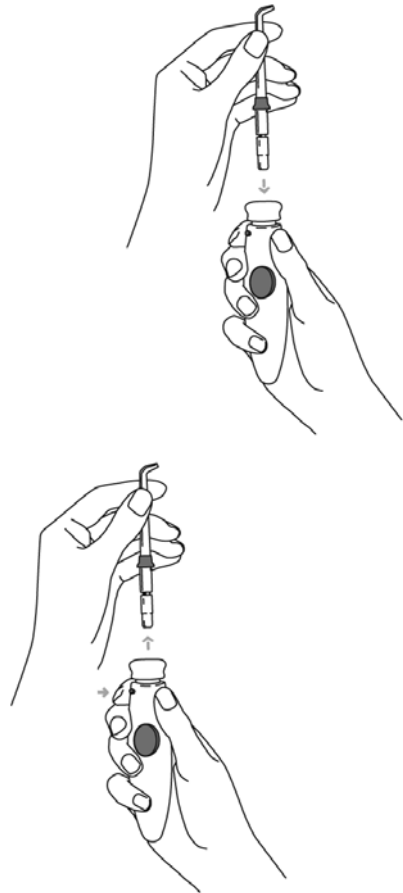
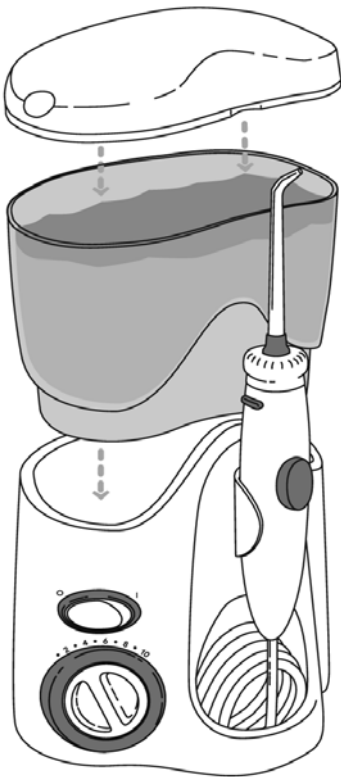


Выбор уровня давления воды.

Переведите регулятор давления на базе в крайнее левое положение — минимальное давление воды. Постепенно увеличивайте давление до необходимого Вам уровня, который Вы выберите сами или Вам подскажет Ваш стоматолог.

Расположение во рту.

Расположите насадку в ротовой полости. Направьте кончик насадки на зубы. Свободной рукой включите прибор. Установите давление воды на нужный Вам уровень.

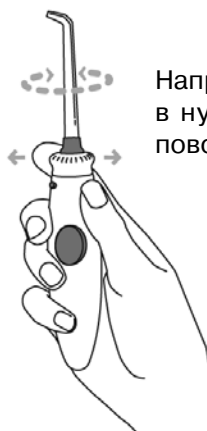
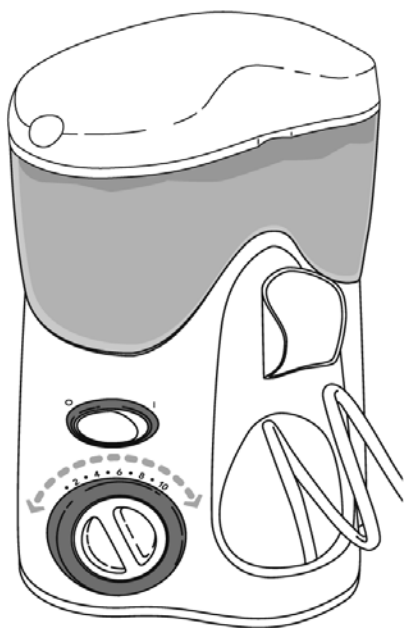


Направляйте струю в нужном направлении, поворачивая насадку.

Рекомендованная техника.

Направляйте струю воды под углом 90 градусов к линии десны. Смыкайте губы, чтобы избежать разбрызгивания воды, но не закрывайте рот, давая воде свободно вытекать наружу.

Для лучших результатов начинайте с боковых, дальних зубов, двигаясь к передним зубам. Перемещайте насадку от зуба к зубу, делая паузы между зубами. Продолжайте чистку до тех пор, пока зоны вокруг зубов и между зубами не станут чистыми.

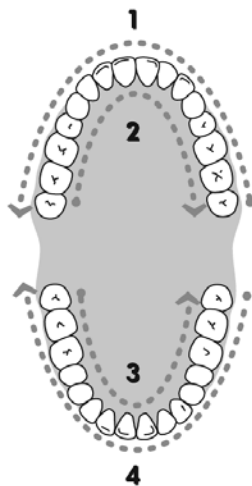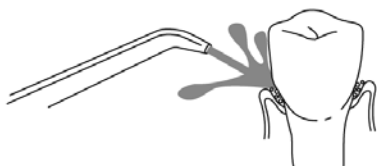


Пауза.

Вы можете на время прекратить подачу воды нажатием кнопки паузы на ручке.

После завершения чистки.

Выключите прибор. Вылейте оставшуюся жидкость из резервуара. Отключите прибор от сети.

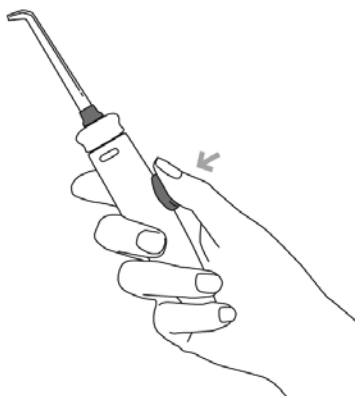

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ


Насадка Pik Pocket.

Насадка Pik Pocket позволяет подавать воду или антибактериальный раствор непосредственно в периодонтальные карманы. Для этого расположите мягкий кончик насадки напротив зуба под углом в 45 градусов и аккуратно заведите насадку под линию десны, в карман. Включите прибор при минимальном уровне давления воды и производите чистку, продвигая насадку между зубами и вдоль линии десны. Продолжайте чистку до тех пор, пока резервуар не опустеет.



Насадка для чистки языка.

Расположите насадку на языке, включите ирригатор при минимальном уровне давления воды и увеличивайте уровень давления до комфортной для Вас степени. Аккуратно расположите насадку на центр языка и, прилагая небольшое усилие, тяните насадку вдоль языка.

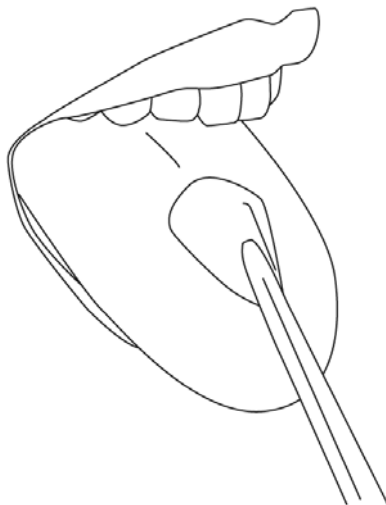

центре WaterPik Technologies. Официальный дистрибьютор в России — ЗАО "Арком". (812)327 0353. E-mail:arkom@arkom-org.com.

WaterPik Technologies уверяет пользователя этого прибора, что прибор полностью исправен и дает гарантию 1 год с даты покупки прибора. Пользователю потребуется предъявить документ, подтверждающий дату покупки, и прибор в полной комплектации для обмена или ремонта прибора по гарантии. WaterPik Technologies обменяет прибор, если он использовался по назначению, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к прибору, не был физически поврежден потребителем и работал только с насадками и аксессуарами, которые одобрены WaterPik Technologies.

Купите дополнительные насадки и аксессуары Вы можете у представителей WaterPik Technologies в России — ЗАО АРКОМ. Приглашаем Вас посетить наш сайт — www.arkom-org.com

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Действия по устранению неисправности
Насадки и насадка для чистки языка Протечки между насадкой и поворотным механизмом насадки	Насадка установлена неправильно	Снимите насадку и установите снова
Насадка Pik Pocket Течь мягкого кончика	Кончик порван	Замените насадку
База прибора Течет шланг к ручке	Поврежден шланг	Может быть заменен в авторизованном центре WaterPik, или Вы можете запросить ремонтный комплект для самостоятельного устранения неисправности
Течет резервуар	Резервуар неправильно расположен на базе или клапан резервуара перевернут	Заменить клапан резервуара (Позвоните в сервисный центр WaterPik Technologies). Переверните клапан
Плохое давление/ не идет вода	Резервуар неправильно расположен на базе	Переустановите резервуар. Приложите небольшое равномерное усилие сверху на резервуар.
Прибор не включается	Мотор не работает	Убедитесь, что в сети есть ток. Для этого подключите к сети другое электрическое устройство и включите его.

