

GÉZA *tone*



ПРИБОР  
КОСМЕТИЧЕСКИЙ  
BIO SONIC m775

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Инновации и революционные исследования воплотились в многофункциональном косметическом приборе для лица BIO SONIC m775 от компании Gezatone, который создан для высококачественного профессионального ухода за кожей лица в домашних условиях.

### Применение постоянного гальванического тока:

- регулирует обменные процессы
- улучшает тонус кожи
- нормализует деятельность сальных желез
- усиливает питание и увлажненность кожи
- способствует регенерации клеток кожи
- стимулирует фибробласты на выработку белков коллагена и эластина
- способствует введению в глубокие слои кожи специальных заряженных косметических комплексов (ионофорез)
- ионофорез многократно усиливает действие специальной заряженной косметики

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

---

В косметологии апробированный и зарекомендовавший себя метод гальванических токов применяется уже на протяжении многих лет. Косметологи и специалисты SPA-центров активно используют гальванические токи в восстанавливающих, омолаживающих и оздоровительных процедурах.

Под воздействием ионов положительной и отрицательной полярности улучшается работа клеток, проницаемость мембран, в результате чего клетки активно получают ионы кальция, натрия, калия и многих других. Перемещение ионов способствует улучшению работы клеточных систем, стимулируется выработка собственного коллагена, гиалуроновой кислоты, эластина - белков, отвечающих за упругость и эластичность кожи.

Гальванические токи используются также для введения активных препаратов в глубокие слои кожи. Эта методика носит название «ионофорез», способствует усвоению компонентов косметики, создавая клеточные «депо», в которых сохраняются увлажняющие, питательные и омолаживающие вещества. Таким образом, устраняется дефицит активных ионов, который приводит к преждевременному старению кожи.

Использование слабых токов значительно укрепляет и оздоравливает кожу, способствует клеточному очищению и детоксикации, стимулирует обменные процессы в клетках. Гальванические токи снимают спазм мимических мышц, провоцирующий образование морщин, а также восстанавливают нормальную работу сосудов и лимфатических каналов, что улучшает цвет лица и способствует снятию отеков.

Клинически доказанным эффектом от проведения курса процедур гальванотерапии является увеличение количества волокон эластина и коллагена в дерме, в результате чего многократно увеличивается гладкость кожи, улучшается цвет и внешний вид лица.

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ


Дезинкрустация — процедура очищения лица, сочетающая использование гальванического тока и щелочного раствора. В режиме «ION —» под действием отрицательного электрода щелочной раствор, соединяясь с жирной кислотой, образует мыло: комедоны в сальных железах омыляются, растворяются и легко выводятся, поэтому процедура подходит даже для очищения чувствительной кожи.

Гальванический ток, воздействует на кожу через лосьон дезинкрустант, (щелочной раствор) открывает поры, разрыхляет кожу и очищает от ороговевших клеток.

- открывает кожные поры, расщепляет и омыляет кожный жир—себум, тем самым очищая кожу лица
- увлажняет кожу, восстанавливает ее тургор
- активизирует тонус сосудов и улучшает цвет лица
- стимулирует трофику тканей и кислородное дыхание клеток кожи



Лосьон дезинкрустант

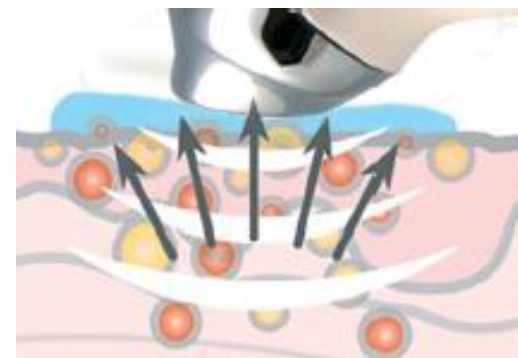

Дезинкрустация (ION-)

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА «ION –» ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ

#### ИОНОФОРЕЗ (ION-)

Ионофорез — это процедура омоложения кожи методом воздействия гальванического тока в сочетании с косметическими препаратами.


В режиме «ION –» косметические средства, имеющие отрицательный заряд, благодаря свойству гальванического тока повышать проницаемость тканей проникают в более глубокие слои эпидермиса.

В режиме (ION-) проникают отрицательно заряженные препараты.

- увлажняет и/или питает кожу в зависимости от косметического средства
- восстанавливает тургор кожи
- усиливает проникновение активных косметических средств в глубокие слои кожи



Заряженный комплекс.  
Заряд «-»

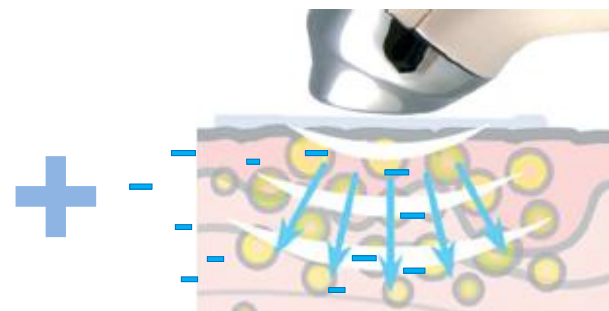

Ионофорез (ION-)

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА «ION+» ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ


#### ИОНОФОРЕЗ (ION+)

Ионофорез — благодаря свойству гальванического тока повышать проницаемость тканей, ионофорез в режиме «ION+» дает возможность вводить питательные препараты в более глубокие слои эпидермиса. Особая ценность процедуры ионофореза состоит в том, что она повышает способность кожи удерживать в своих клетках влагу, недостаток которой является главной причиной появления морщин. В режиме «ION+» проникают положительно заряженные препараты.

- уменьшает раздражение и воспаление кожи, снимает, зуд, покраснения
- устраняет отеки и выводит токсины
- способствует укреплению стенок сосудов
- уменьшает проявления купероза, освежает кожу, способствует сужению пор



Заряженный комплекс.  
Заряд «+»

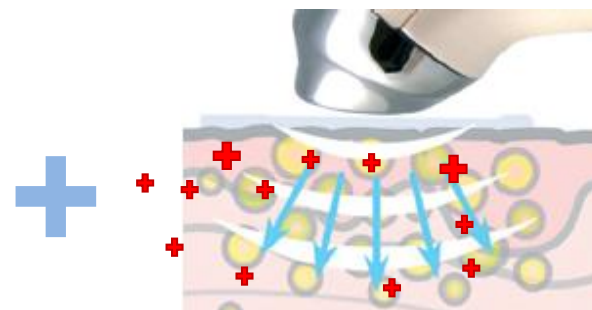

Ионофорез (ION+)

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775


## МАССАЖ

В режиме MASSAGE - прибор генерирует положительно и отрицательно заряженные ионы (ION+/-) Режим тонизации и увлажнения клеток кожи, который способствует ионизации и «перезарядке» воды в клетках. Таким образом, увлажнение становится более совершенным, кожа перестает терять влагу, становится более увлажненной, с меньшим количеством морщин. Функция вибрационного массажа восстанавливает кровоток и способствует насыщению кожи кислородом.

- разглаживает мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта
- снимает повышенный тонус мимических мышц лица
- дает прекрасные результаты при увлажняющих процедурах (рекомендуется использовать специальные увлажняющие средства)
- стимулирует синтез собственного коллагена и эластина клетками кожи
- восстанавливает собственные защитные функции кожи



Токопроводящий гель

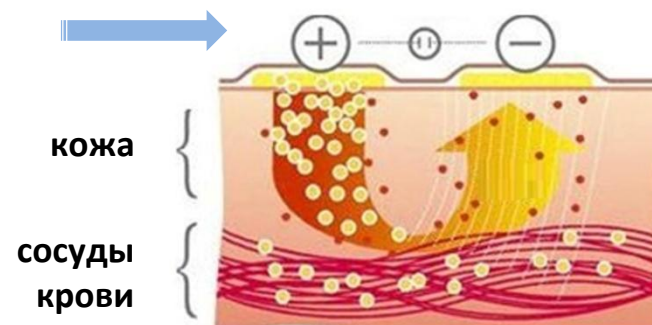

Ионофорез ION +/-



# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775


## ЛИФТИНГ

LIFTING - Программа гальванического лифтинга – режим, способствующий синтезу волокон коллагена и эластина, повышению упругости и эластичности кожи. Гальванические токи не только воздействуют на кожу, но и проникают в глубокие слои клеточной ткани. Процедуры лифтинга дают наиболее выраженный подтягивающий эффект при воздействии курсом.

- благодаря режиму лифтинга устраняются мелкие морщинки и обвисания кожи
- количество и глубина морщин уменьшается
- стимулирует синтез собственного коллагена и эластина клетками кожи
- улучшает кровообращение, углеводный и белковый обмены
- запускает восстановительные процессы
- усиливает регенерацию и репарацию



Токопроводящий гель

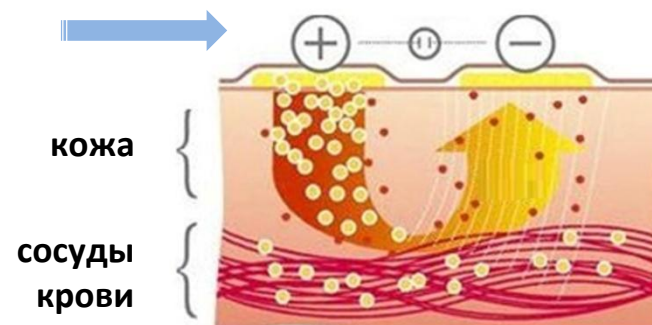

Ионофорез ION +/-



# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- A** Кнопка «POWER»  
включения/выключения питания
- B** Кнопка «MODE SELECT» выбора режимов  
Работы и световые индикаторы:  
ION + (питание, ионофорез)  
MASSAGE (массаж, увлажнение)  
ION - (ионофорез, дезинкрустация)  
LIFTING (лифтинг)
- C** Кнопка «INTENSITY» выбора интенсивности  
Воздействия и световые индикаторы:  
LOW (низкая), HIGH (высокая) интенсивность
- D** Световой индикатор «LOW BATTERY» состояния  
Разряда встроенных аккумуляторов
- E** Контактные площадки для зарядки встроенных  
аккумуляторов при установке аппарата на базу-  
подставку

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



### Лосьон для глубокого очищения "Дезинкрустант" Beauty Style

Лосьон для глубокого гальванического очищения кожи всех типов. Препарат сорбирует избыток кожного сала и различные загрязнения, размягчает комедоны и способствует их легкому удалению.



Специализированные «заряженные» комплексы, созданные специально для взаимодействия с гальванотерапией (заряд «-»)

Поток ионов отрицательной полярности, (необходимо выбрать режим «-»), глубоко проводит активные компоненты в кожу, работая на клеточном уровне.



### Гель активный "Кислородный гель с гиалуроновой кислотой" Beauty Style

Гель для проведения аппаратных процедур ионофореза. Препарат ускоряет обменные процессы, глубоко питает и увлажняет, восстанавливает процессы кожного дыхания.



### Противокуперозный комплекс Beauty Style "Комфорт" , 5шт\*3мл (заряд "+")

Специальный концентрат, предназначенный для проведения процедур с приборами на базе гальванических токов.

Активная формула укрепляет стенки сосудов и улучшает местную микроциркуляцию, заметно уменьшая проявления купероза.

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- Заболевания сердечно-сосудистой системы выше 2Б степени, использование электрокардиостимулятора.
- Период беременности.
- Эпилепсия, сахарный диабет, рассеянный склероз.
- Злокачественные онкологические заболевания.
- Наличие нарушений чувствительности кожи (болевой и температурной) в области применения аппарата.
- Нарушение целостности кожных покровов (травмы, ссадины), послеоперационный период, дерматологические заболевания (экзема, дерматит), не использовать на родимых пятнах.
- Острые воспалительные процессы, гнойнички, воспаление сальных желез.
- Наличие подкожных силиконовых имплантатов.
- В течение периода действия инъекций ботокса.
- Перед использованием аппарата после косметических и пластических операций и операций с применением имплантатов из металлических материалов необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
- При наличии металлических зубных протезов, брекетов и т.п. рекомендуется изолировать их от воздействия гальванического тока, поместив между зубами и губой кусочек токонепроводящего материала (тонкий пластик, пленка).
- При аллергии на металл следует воспользоваться нетканой маской, пропитанной косметическим средством, в качестве промежуточной среды.
- При выполнении процедур не затрагивайте параорбитальную зону (глазное яблоко), слизистую губ и зону проекции щитовидной железы.

# ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**НАИМЕНОВАНИЕ:** Аппарат для лица "Домашняя Гальваника" с вибрацией Gezatone m775

**Артикул:** 1301076

**НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:** DC 3 В (от встроенного аккумулятора)

**ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ:** не более 120 мА

**ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА:**

– в монополярных режимах

Ion «+» / Ion «-» постоянное напряжение  $\pm 9/18$  В

– в биполярных импульсных режимах

Massage  $\pm 8/15$  В, длительность импульсов 45 мс

Lifting  $\pm 8/15$  В, длительность импульсов 400 мс

**ВИБРОМАССАЖ. ЦИКЛ РАБОТЫ:** 4 сек. включен, затем 1 сек пауза (во всех режимах, кроме режима Lifting)

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:**

+15 ... 35°C при влажности 20 ... 85%

**РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ:** 240 x 230 x 65 мм

**МАССА В УПАКОВКЕ:** 0.8 кг

**ШК EAN13:** 3004564026152



# GEZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>