

NAOMI  
cosmetics

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

## БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ




ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ЛЕГКИЙ МАССАЖ

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ

BRADEX™  
— Health & Beauty

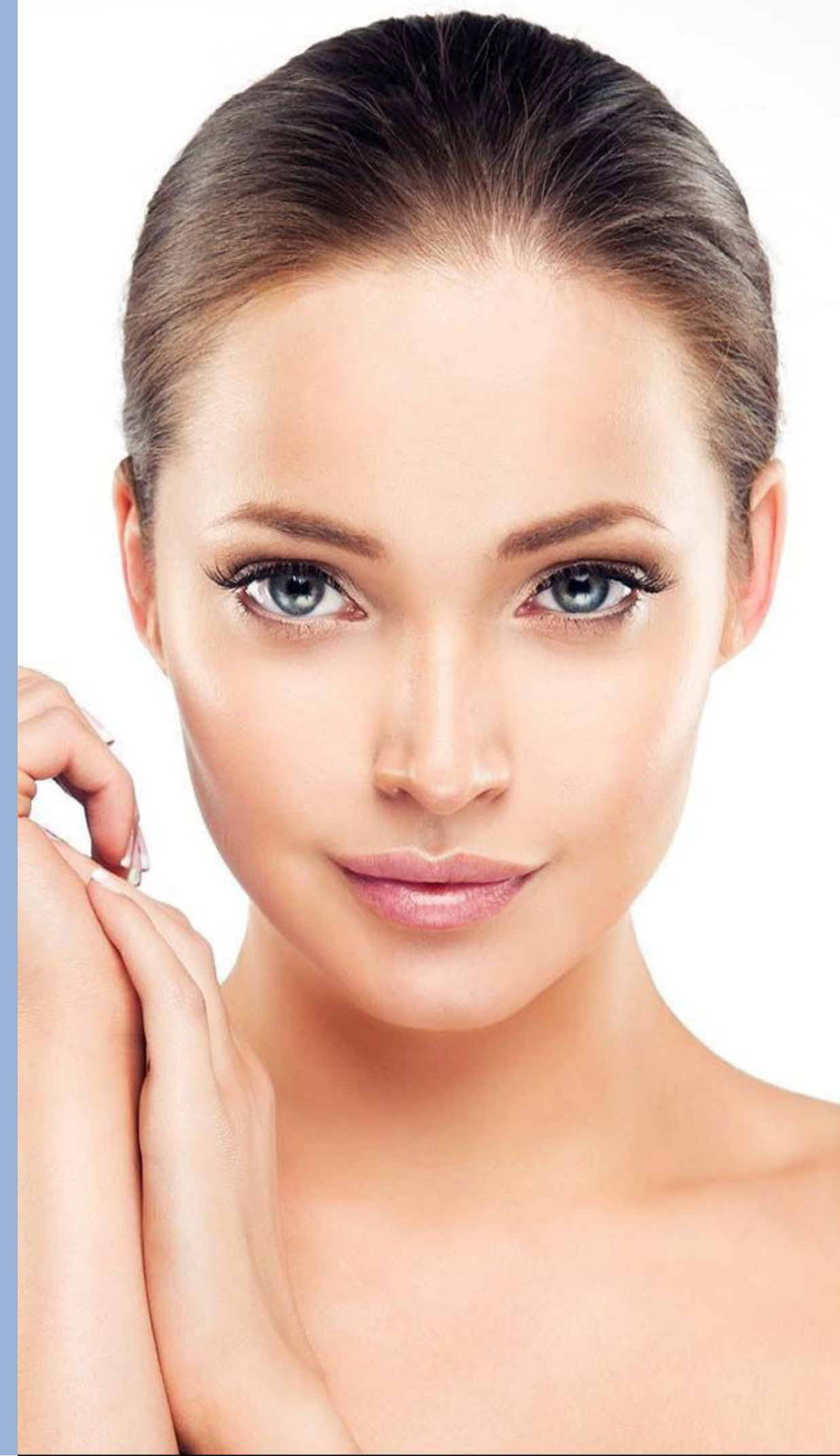


## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ «БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» BRADEx KZ 0537 СОЗДАН ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ.
- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОМ ПОМОГАЕТ БОРЬБЫ С КОМЕДОНАМИ, РАСШИРЕННЫМИ, ЗАБИТЫМИ ПОРАМИ И ВЫРОВНЯТЬ ТОН КОЖИ.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКОГО МАССАЖА ПОМОГАЕТ ОМОЛОЖЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТОНУСА КОЖИ.
- «БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» – САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА У ВАС ДОМА, КОТОРАЯ БЕЗОПАСНА И БЕЗБОЛЕЗНЕННА, ЭКОНОМИЧНА И НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.
- ТОЛЬКО ВОДА И «БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» ДЛЯ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ КОЖИ.




» НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ

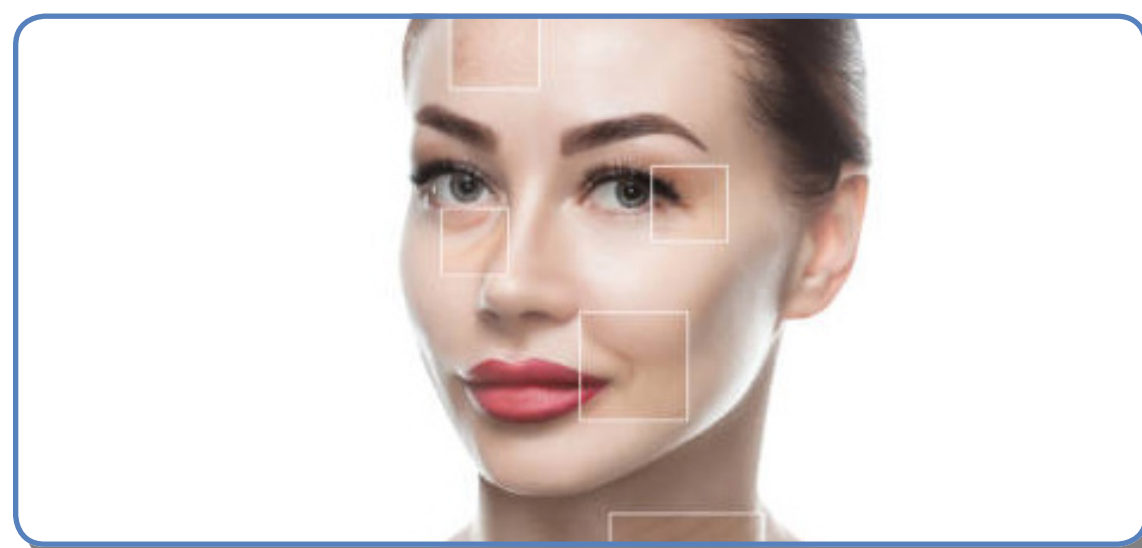

» КОМЕДОНЫ, РАСШИРЕННЫЕ И ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ




» ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА, ЖИРНАЯ, СМЕШАННАЯ КОЖА

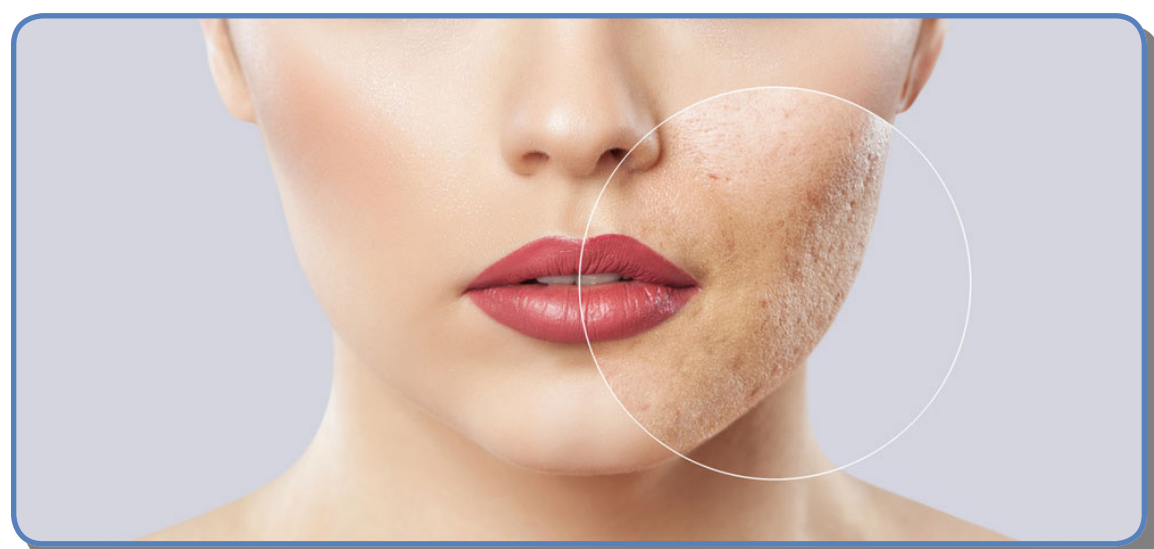

» СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ, ПОСТАКНЕ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА





» СНИЖЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ

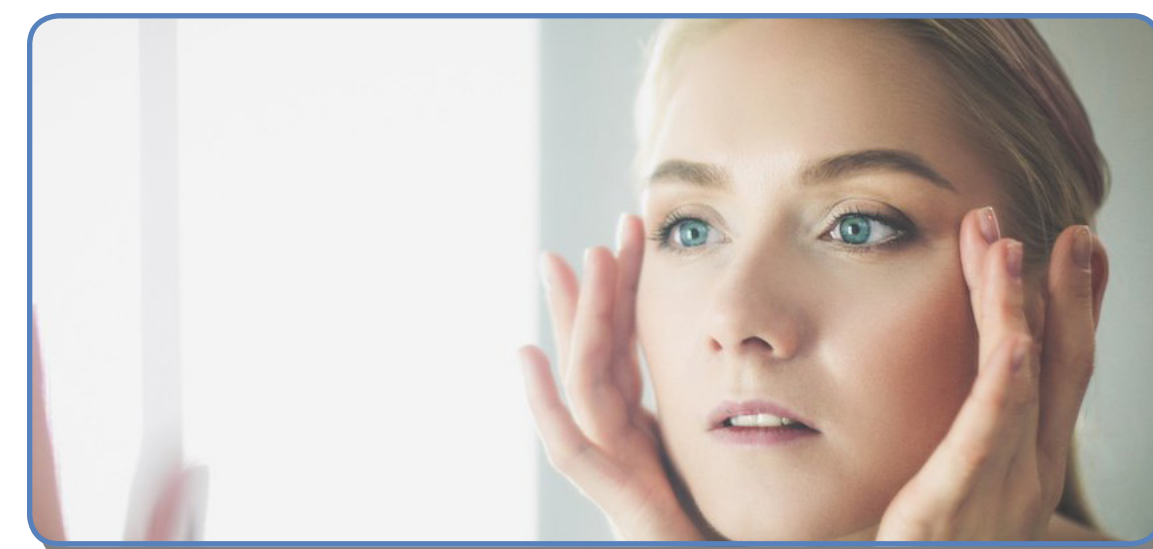


» НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, БЛЕДНОСТЬ, СТРЕСС И «УСТАЛОЕ» ЛИЦО


## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

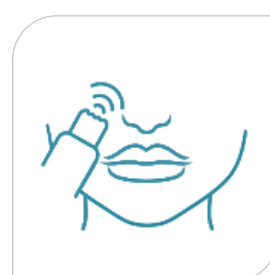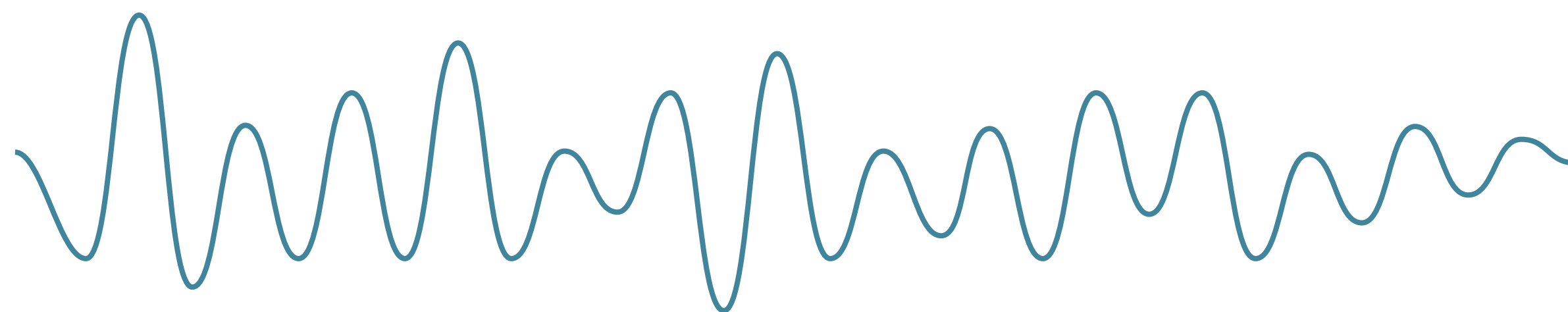


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ПИЛИНГ

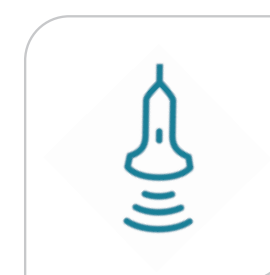

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
МАССАЖ

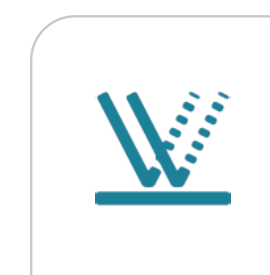


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ФОНОФОРЕЗ

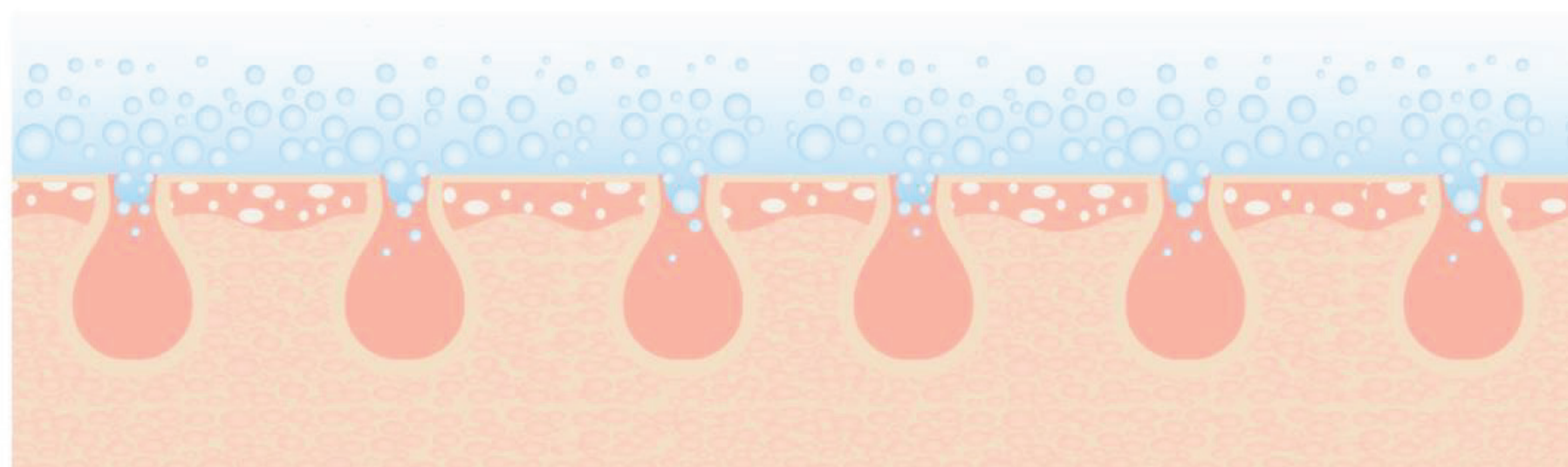

## УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ / МАССАЖ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ – ЭТО ВВЕДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА В ПОВЕРХНОСТНЫЙ И СРЕДИННЫЙ СЛОЙ ДЕРМЫ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ЛЕЧЕБНО-ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

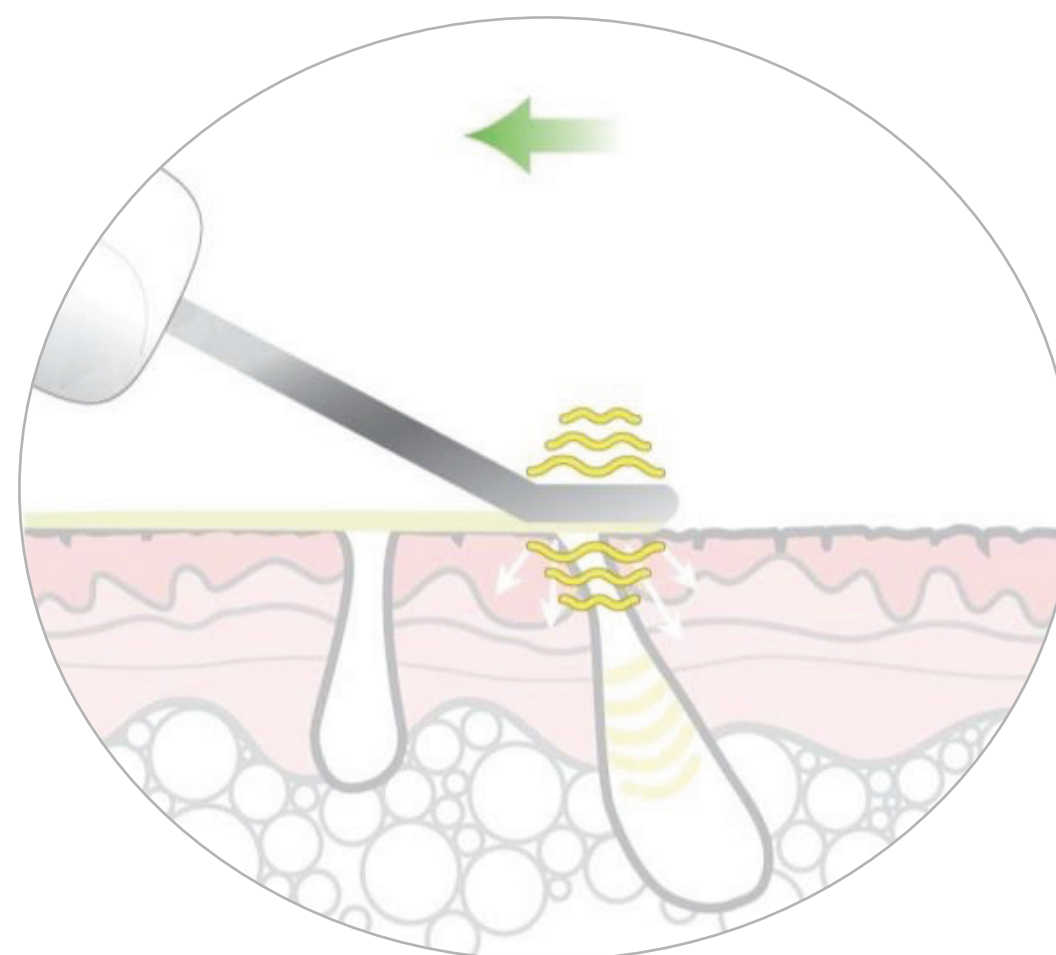

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ САМИ ПО СЕБЕ СТИМУЛИРУЮТ РЕГЕНЕРАЦИЮ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ УСИЛИВАЮТ ЭФФЕКТ.

### РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ  
КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ  
ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ВОСПАЛЕНИЙ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА



УСТРАНЕНИЕ  
ЗАСТОЯ И  
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ  
КОЖИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ  
60 МИН



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА




ШНУР USB В  
КОМПЛЕКТЕ



РАСПЫЛИТЕЛЬ  
ДЛЯ ВОДЫ


- МАТЕРИАЛ: АБС ПЛАСТИК.
- ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР: 7 ВТ, МА/Ч.
- ЗАРЯЖАЕТСЯ ОТ USB.
- РАЗМЕР: 13 ММ X 170 ММ X 45 ММ.
- ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ – 1 ШТ., ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ АППЛИКАТОРА – 1 ШТ., КАБЕЛЬ USB -1 ШТ., РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ – 1 ШТ., ИНСТРУКЦИЯ.

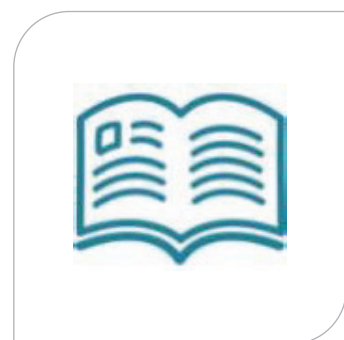


ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




СРОК  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
1 ГОД

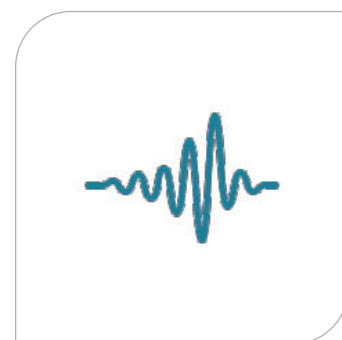

РАБОТАЕТ ОТ  
ВСТРОЕННОГО  
АККУМУЛЯТОРА

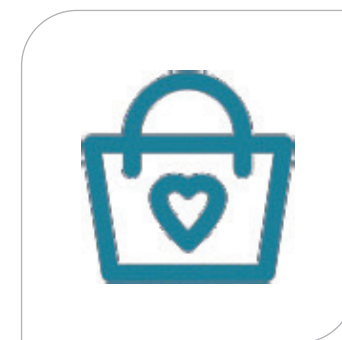


УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ

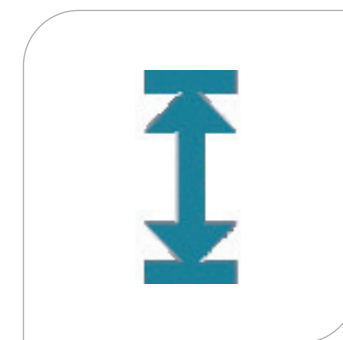

КОМПАКТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ЦЕНА

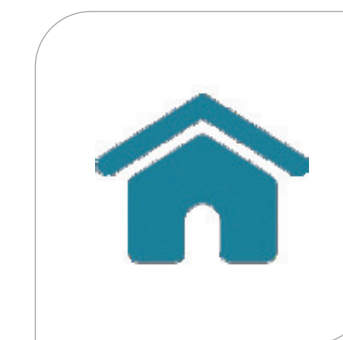

КОМФОРТНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДОМА

## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



## ПРИМЕНЕНИЕ

### ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

- Перед процедурой нанесите на лицо воду с помощью распылителя из комплекта или косметические препараты с активными компонентами.
  - Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Включите аппарат, затем нажмите на кнопку включения еще раз, чтобы запустить процесс работы.
  - Лопатку аппарата устанавливаем под углом 45 градусов к поверхности кожи и передвигаем ее по массажным линиям, учитывая направление тока лимфы.
  - Используйте кнопку включения для перехода от цикла к циклу.
- 1. ОЧИЩЕНИЕ.** Происходит глубокое очищение кожи. Продолжительность - 5 минут, емкости батареи хватает на 5 циклов очистки.
  - 2. ПОГЛОЩЕНИЕ.** Запускается процесс поглощения загрязнений.
  - 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ.** На этом этапе происходят восстановление и тонизация кожи. Продолжительность цикла – 5 минут, емкости батареи хватает на 30 циклов тонизации.
  4. Не использовать в области глаз.

### МАССАЖ

- Нанесите на кожу воду с помощью распылителя.
- Обратной стороной лопатки выполняйте движения против роста волос по массажным линиям.



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

### ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ШЕИ С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ




**Арт. KM 0025 – 50 мл**

Надежно оберегает и заботливо ухаживает за нежной кожей вокруг глаз и шеи, разглаживает мелкие морщинки, предотвращает проявление возрастных изменений.

Природные компоненты активизируют клеточную энергию, наполняют кожу жизненной силой и естественной красотой, гель активно питает, поддерживает тонус и восстанавливает упругость Вашей кожи.

### ТОНИК С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ «NAOMI»

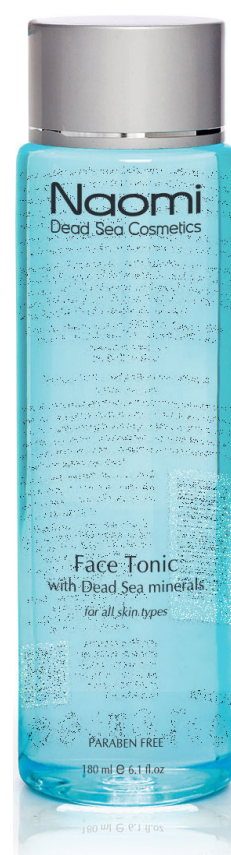

**Арт. KM 0028 – 180 мл**

Идеальное очищение, тонизирование, завершение демакияжа без стягивания кожи и неприятных ощущений!

Его специальная формула с содержанием растительных экстрактов направлена на борьбу со старением кожи и защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Активные ингредиенты: сок листьев алоэ, минералы Мертвого моря, касторовое масло, фруктоза, мочевины, авокадо, аллантоин.

Для всех типов кожи.

### ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА «NAOMI»



**Арт. KM 0102 – 200 мл**

Средство активно очищает, скрабирует и ухаживает за кожей.

В составе - масло жожоба, экстракт ромашки, гель алоэ вера, экстракт тысячелистника, пантенол, витаминный комплекс, минералы Мертвого моря.

### ПРИБОР ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА «БЬЮТИСТИК»



**Арт. KM 0025 – 50 мл**

Прибор для кожи лица «Бьютистик» – новейшее средство борьбы с несовершенствами кожи.

Эффективность LED-терапии для решения проблем с кожей подтверждена косметологами.

«Бьютистик» удобно носить с собой, брать в поездки. Теперь, если кожа преподнесет Вам неприятный сюрприз, вы знаете, что делать.

Терапия одного участка занимает всего две минуты. «Бьютистик» оснащен автоматическим таймером, поэтому можете не бояться превысить допустимое время.



## РЕЗУЛЬТАТЫ\*










- Кожа лица становится упругой и гладкой, без признаков возрастного старения.
- Улучшается местное кровообращение и обмен веществ, активируются ферменты.
- Клетки насыщаются кислородом и питательными веществами, избавляются от токсинов.
- Улучшается отток лимфы, спадают отеки на лице, пропадают синяки и мешки под глазами.
- Разглаживаются мелкие морщины и неровности, глубокие морщины становятся менее заметными.
- Повышается тонус мышц, развивается лифтинг-эффект. контуры лица и тела становятся четкими, подтянутыми.
- Нормализуется функция сальных и потовых желез. снижается уровень воспаления, уменьшается количество угревых высыпаний, ускоряются процессы заживления.
- Стимулируется синтез гиалуроновой кислоты, восстанавливается водный баланс кожи, исчезает сухость и шелушение.
- Повышается иммунитет кожи, она противостоит негативному воздействию внешних факторов.

\* При регулярном использовании прибора 1 - 2 раза в неделю.



**BRADEX™**  
— Health & Beauty

**NAOMI**  
c o s m e t i c s

-  [bradex.ru](http://bradex.ru)
-  [bradexmoscow](#)
-  [bradexrussia](#)
-  [Bradexmoscow](#)
-  [bradexmoscow](#)
-  [bradexmoscow](#)
-  Оптовый отдел  
**8 (495) 647-09-59**