


OMIO – 560

Портативный ирригатор
для полости рта
Инструкция по применению

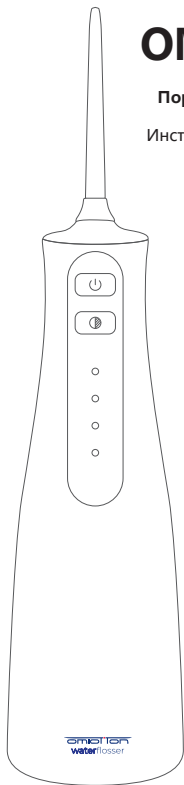

Основные меры предосторожности

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо всегда соблюдать базовые меры предосторожности, описанные ниже:

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ОСТОРОЖНО

Для минимизации риска поражения электрическим током:

- Не берите зарядное устройство мокрыми руками.
- Не погружайте и не роняйте прибор в воду или другие жидкости.
- Проверьте, не поврежден ли шнур прибора перед первым использованием, и периодически проверяйте шнур на наличие повреждений на протяжении всего срока службы прибора.



ВНИМАНИЕ

Для минимизации рисков ожогов, поражения электрическим током, возгорания, травмирования человека!

- Если прибор вскрыт/разобран на детали по ЛЮБЫМ причинам, гарантия НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА.
- Не пользуйтесь прибором, если повреждены вилка или шнур, если прибор работает неправильно, если его роняли или повредили, если он упал в воду.
- Не направляйте водяную струю под язык, в ухо, нос или другие чувствительные зоны.
- Используйте прибор только в рамках предусмотренного применения, описанного в данной инструкции, или в соответствии с рекомендациями вашего стоматолога.
- Магнитное поле: магнит может повлиять на кардиостимуляторы и другие имплантируемые медицинские изделия. Зарядное устройство фиксируется с помощью магнитного поля, не держите вблизи него обладающие магнитными свойствами материалы и оборудование, чувствительное к магнитным полям.
- Используйте только наконечники и принадлежности, идущие в комплектации к модели.
- Не пытайтесь вставить посторонние предметы в открытые разъемы прибора.
- Держите зарядное устройство и шнур вдалеке от нагреваемых поверхностей.
- Не используйте этот продукт на улице или в помещениях, где распыляются аэрозоли (спреи) или куда поступает дополнительный кислород.

Основные меры предосторожности


- Не используйте йод, физраствор (раствор соли) или нерастворимые в воде концентрированные эфирные масла с этим продуктом. Их использование может ухудшить эксплуатационные свойства прибора и уменьшить срок его службы. Использование подобных веществ приведет к отмене гарантии.
- Перед использованием прибора снимите все украшения с губ и рта.
- Не используйте прибор, если на языке или в ротовой полости есть открытые раны.
- Если ваш лечащий врач советует принимать антибиотики перед стоматологическим лечением, проконсультируйтесь с ним перед использованием ирригатора или любого другого прибора для гигиены полости рта.
- Если прибором пользуются дети от 7 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями, тщательно инструктируйте их и присматривайте за ними во время использования.
- Присматривайте за детьми во время использования прибора, так как они могут с ним играть.
- В приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем, прибор не требует технического обслуживания. Наполните резервуар теплой водой или другим раствором, рекомендованным профессиональным стоматологом.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

Описание продукта



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

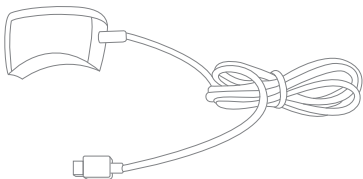


НАКОНЕЧНИК

Наконечники рекомендуется менять раз в полгода.



СЕТЕВОЙ АДАПТЕР

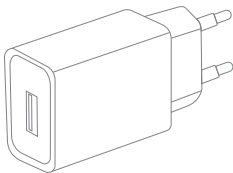

ЗАРЯДКА ПРИБОРА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Если вы пользуетесь ирригатором раз в день или реже, рекомендуется заряжать его раз в неделю. Если вы пользуетесь ирригатором два и более раза в день, заряжайте прибор чаще.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Перед заполнением резервуара и использованием прибора снимите магнитное зарядное устройство с корпуса. Поднимите откидную крышку и заполните резервуар водой комнатной температуры.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКОВ

Установите наконечник в отверстие наверху ирригатора. Надавите на наконечник до щелчка, чтобы зафиксировать его. Для извлечения наконечника нажмите кнопку извлечения наконечника и выньте его из ирригатора.

ВНИМАНИЕ:
Не нажимайте на кнопку извлечения наконечника во время работы прибора.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 2 секунд, прибор включится. Нижний светодиод служит индикатором заряда: синий цвет – нормальный уровень заряда, красный цвет - заряд на низком уровне, батарею нужно подзарядить. Верхние светодиоды служат индикаторами СЛАБОГО, СРЕДНЕГО и СИЛЬНОГО режимов/давления. Нажмите кнопку переключения режима/давления для переключения между режимами в порядке возрастания.

РАБОТА

После включения ирригатора еще раз нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы вода начала поступать в наконечник. (Примечание: не включайте ирригатор

без наконечника, в противном случае вода может попасть в корпус прибора. Кнопка Вкл/Выкл возвращается в прежнее положение вскоре после нажатия; прибор не включится, если ее держать нажатой). Во время работы прибора можно поменять режим, нажав на кнопку переключения режима/давления. Пользователи могут выбрать наиболее подходящий им режим. Для остановки работы ирригатора нажмите кнопку Вкл/Выкл. У прибора есть функция автоматической остановки после 2-минутного цикла работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Прибор автоматически отключается, если не работает в течение 30 секунд.

ДЕТСКИЙ РЕЖИМ

Если ребенку или взрослому пользователю нужен режим с пониженным давлением водяной струи, следует выбрать детский режим. Для этого нужно включить прибор, нажать и в течение 2 секунд удерживать кнопку переключения режима/давления, пока не мигнет индикатор заряда, затем кнопку нужно отпустить. Тогда прибор переключится на детский режим. Нажимая на кнопку переключения режима/давления, пользователи могут выбрать нужное давление. При следующем включении прибор по-прежнему будет работать в детском режиме. Пользователи могут переключиться на взрослый режим, нажав и в течение 2 секунд удерживая кнопку переключения режима/давления, индикатор заряда вновь загорится нормальным цветом, и прибор переключится с детского режима на взрослый.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА

Прибор можно заблокировать для предотвращения случайного нажатия кнопки Вкл/Выкл и случайного включения прибора во время транспортировки.

Нажмите одновременно кнопку Вкл/Выкл и кнопку переключения режима/давления и удерживайте их в течение 2 секунд. Светодиодные индикаторы загорятся сверху вниз. Это означает, что прибор заблокирован. Пока он заблокирован, кнопка Вкл/Выкл не будет работать. Для разблокировки вновь нажмите одновременно кнопку Вкл/Выкл и кнопку переключения режима/давления и удерживайте их в течение 2 секунд. Светодиодные индикаторы загорятся снизу вверх, прибор разблокируется и включится.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНИКА

Для лучшего результата начните очистку с задних зубов и двигайтесь к передним зубам. Ведите водяную струю по десневой линии под углом 90° и останавливайте на межзубных пространствах. Продолжайте, пока не очистите верхние и нижние зубы с внутренней и внешней стороны.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

Выключите ирригатор. Слейте оставшуюся воду из резервуара. При желании переверните резервуар вверх дном, слейте воду и очистите его, затем вновь поместите резервуар в корпус.

ЗАРЯДКА

Вставьте вилку беспроводного зарядного устройства в розетку адаптера DC5V. Когда беспроводное зарядное устройство зафиксируется на корпусе, на зарядном устройстве загорится синий светодиод, а на приборе замигает красный светодиод, что будет означать нормальную зарядку. Когда прибор полностью зарядится, индикатор на приборе загорится синим. Внимание: во время зарядки прибор заблокирован для работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ РТА И ДРУГИХ РАСТВОРОВ

Наш ирригатор можно использовать вместе с ополаскивателями и антибактериальными растворами. Для более легкого добавления других растворов снимите резервуар с корпуса (см. раздел «ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ») и залейте раствор сверху.

Если вместе с раствором вы добавляете воду, то резервуар можно поместить в корпус и дозаполнить резервуар через отверстие. Для предотвращения закупорки после использования любого специального раствора частично заполните резервуар теплой водой и включите прибор, направьте наконечник в раковину и подождите, когда жидкость полностью выйдет из прибора.

ОЧИСТКА

Никогда не погружайте прибор в воду. Перед очисткой отключите прибор от электросети. При необходимости очистите прибор мягкой тканью и неабразивным чистящим средством.

Резервуар легко снимается и легко чистится, его можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется снимать и очищать резервуар еженедельно.

ОБЩАЯ ОЧИСТКА

Жесткая вода может оставлять отложения внутри прибора в зависимости от своего минерального состава. Если такие отложения не чистить, то они могут отрицательно повлиять на работу прибора. Очистка внутренних деталей: добавьте 1 столовую ложку белого уксуса в резервуар, заполненный теплой водой. Направьте наконечник в раковину. Включите прибор и подождите, пока резервуар опустеет. Промойте резервуар несколько раз, наполняя его чистой теплой водой. Прибор нужно чистить каждые 1-3 месяца, чтобы обеспечить оптимальную работу.

УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ И ЕЕ УТИЛИЗАЦИЯ

Если вы планируете в течение долгого времени хранить ирригатор без использования, убедитесь, что он полностью заряжен. В ирригаторе установлена литий-ионная батарея. К окончанию срока службы батареи отдайте прибор на переработку в соответствии с местным законодательством. Батарею нельзя заменить.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В ирригаторе нет электрических компонентов, обслуживаемых пользователем, поэтому ирригатор не требует постоянного технического обслуживания. Все принадлежности можно купить на сайте waterpikrussia.ru.

ГАРАНТИЯ

Компания-производитель гарантирует оригинальному покупателю отсутствие дефектов качества и материалов у продукта. Гарантия действует 1 год с момента покупки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Размеры прибора: Д83*Ш64*В210 мм;

Высота (с наконечником): 285 мм.

Вес нетто: 305 г.

Объем резервуара: 180 мл.

Давление: 150 - 500 МПа

Входная мощность зарядного устройства: DC 2В
Макс. 1 А

Диапазон рабочих температур: от 5°C до 40°C
внутри помещения, без конденсата.

