

GÉZATONE

Biolift 4

ДАРСОНВАЛЬ

импульсный
массажер



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

Дарсонвализация - это воздействие на кожу высокочастотными переменными токами, которые имеют высокое напряжение, частоту колебаний и малую силу. Импульсы тока воздействуют на кожу через стеклянный электрод, заполненный газом.

При контакте с кожей легкие микроразряды оказывают стимулирующее действие на кровообращение, активизируют обменные процессы, стимулируют лимфодренаж.

Образование озона из кислорода воздуха оказывает мощное бактерицидное действие.

Интенсивность разряда можно изменять в пределах от «тихого» до искрового.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

При местной дарсонвализации, для которой предназначен прибор BIOLIFT4 103, происходит воздействие на определенный участок тела.

При проведении процедуры действие оказывают 2 фактора:

- Импульсный высокочастотный ток малой силы
- Электрический разряд, возникающий между тканями и электродом



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ


ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ



В 1891 году французский физиолог и физик Жак Арсен Д'Арсонваль обнаружил физиотерапевтическое действие высокочастотных импульсных токов на кожные заболевания (сегодня это называется токами Дарсонваля).

Учёный предлагал лечить электричеством широкий спектр болезней — от кожных раздражений и мигрени до анемии и радикулита.

Токи Дарсонваля более 100 лет активно применяются в косметологии, и признаны одним из наиболее эффективным методов борьбы с различными косметическими недостатками и проблемами кожи.

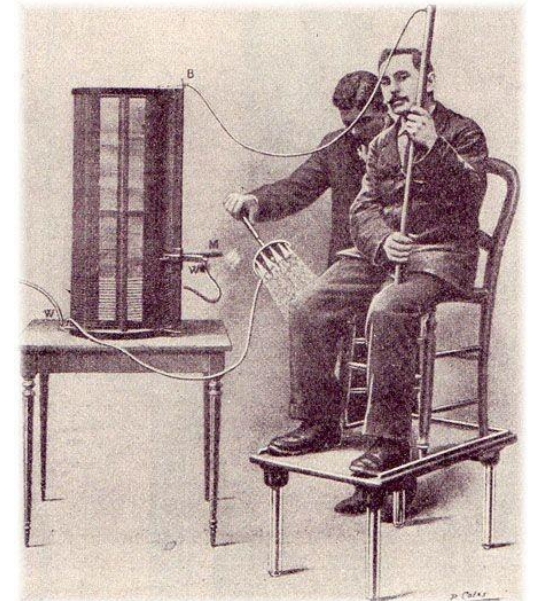

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ПОКАЗАНИЯ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ



- дерматология
- заболевания органов дыхания
- заболевания органов ЖКТ
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- неврологические заболевания
- гнойные и воспалительные процессы
- заболевания опорно-двигательного аппарата
- сосудистые патологии
- лор патологии
- стоматологические заболевания

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- жирная и проблемная кожа
- гнойничковые поражения
- расширенные поры, акне
- мелкие морщины, первые признаки увядания кожи
- нездоровый цвет лица
- морщинки в зоне декольте
- профилактика всех разновидностей облысения
- противодействие выпадению волос
- укрепление луковиц волос
- стимуляция роста волос

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИД РАЗРЯДА	МЕТОДИКА	ЭФФЕКТЫ
 <p>ТИХИЙ РАЗРЯД</p>	<p>Контактная методика Электрод непосредственно соприкасается с кожей.</p> <p>Для проведения процедуры стеклянный электрод прикладывается к месту воздействия или вводится в полость, после чего производится включение прибора с постепенным увеличением силы тока до появления ощущения покалывания (или легкого тепла при полостных воздействиях).</p>	<ul style="list-style-type: none">• Обезболивающее действие• Усиление кровообращения• Устранение спазма сосудов• Повышение тонуса венозных сосудов• Улучшение оттока венозной крови• Устранение спазмов сосудов• Повышение оксигенации и насыщения питательными веществами тканей• Стимуляция регенерации и репарации• Бактерицидное и противовоспалительное действие
 <p>ИСКРОВОЙ РАЗРЯД</p>	<p>Дистанционная методика Удаление электрода от кожи на небольшое расстояние.</p> <p>Для проведения процедуры электрод прикладывается к коже, а затем отрывается от области воздействия на расстояние 0,2-1 см. При этом возникает ощущение покалывания, которое впоследствии сопровождается гиперемией.</p>	<ul style="list-style-type: none">• «Прижигающий эффект» и выраженное бактерицидное действие• Дистанционная методика эффективна для воздействия на проблемную кожу с воспаленными элементами, усиливается действием озона <p>+ все эффекты, присущие тихому разряду</p>

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ


НАСАДКА – ГРИБОК является универсальной насадкой, которая может быть использована для процедур как по лицу, так и по телу обладает мощным бактерицидным действием.

ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА – КАПЕЛЬКА идеальна для «прижигания» отдельных воспаленных элементов и наиболее часто используется для воздействия на прыщики и герпес, локального воздействия на небольшие участки кожи.

НАСАДКА - ЛЕПЕСТОК используется для проведения омолаживающих процедур, для обработки проблемной кожи, для процедур по телу.

НАСАДКА - ГРЕБЕНЬ выполнена в форме расчески специально для воздействия на волосистую часть головы, для предотвращения выпадения волос, нормализации сальной секреции и улучшения состояния и роста волос.

ЭЛЕКТРОД Т-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ позволяет равномерно распределять ток, и используется для лечения и профилактики болезней позвоночника в шейном и грудном отделе.

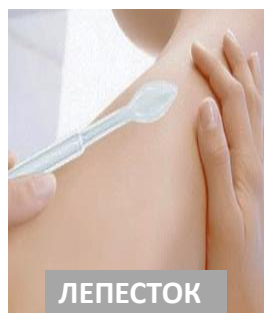

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

КОСМЕТОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА	Аппарат BIOLIFT4 103, благодаря техническим характеристикам и выходным параметрам, предназначен для использования в косметологической и медицинской физиотерапевтической практике для решения многочисленных проблем и терапии различных заболеваний
ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ	Портативный аппарат BIOLIFT4 103 прост в использовании и может применяться, как в условиях кабинетов физиотерапии и косметологии, так и в домашних условиях для поддержания эффекта в промежутках курсовой терапии
УДОБСТВО И КОМФОРТ	Корпус аппарата BIOLIFT4 103 выполнен из высокопрочного пластика, в форме цилиндра, который удобно помещается в руке и, благодаря весу 400 грамм, позволяет комфортно проводить процедуры. Аппарат и все электроды находятся в контурных ячейках футляра, что полностью исключает их повреждение
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	Аппарат BIOLIFT4 103 укомплектован 5-ю стеклянными насадками, использование которых позволяет проводить процедуры на любых участках лица, тела и волосистой части головы

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Раны, ссадины, ожоги и другие повреждения целостности кожных покровов в зоне воздействия.
- Нарушения свертываемости крови, кровотечения.
- Новообразования.
- Нарушения кожной чувствительности.
- Сердечно-сосудистая недостаточность свыше 2Б стадии.
- Индивидуальная непереносимость.
- Выраженные формы купероза, телеангиоэктазии.
- Гирсутизм.
- Лихорадочные состояния (грипп, ОРЗ, ОРВИ).
- Туберкулез легких в активной форме.
- Тромбофлебиты, флебиты.
- Аритмия сердца.
- Эпилепсия.
- Наличие кардиостимулятора.
- Беременность.
- Нервно-психические расстройства.

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- Процедуры дарсонвализации проводятся по чистой сухой коже без применения косметических средств.
- Перед процедурой по лицу или по телу необходимо кожу хорошо очистить, подбирая средства по типу кожи.
- В процедурах по уходу за кожей головы и волосами необходимо вымыть голову.
- В завершении процедур и в промежутках между процедурами для поддержания эффекта рекомендуется использовать косметические средства, подобранные в соответствии с потребностями кожи как для лица, так и для волос и тела.
- В таблице ниже представлены некоторые рекомендации по подбору средств для домашнего ухода.



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ОЧИЩЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ		ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД	
ДЛЯ ЛИЦА жирная, проблемная кожа	Очищающий гель «Контроль» Beauty Style 150 мл.		Корректирующая сыворотка «Контроль» Beauty Style 30 мл.	
ДЛЯ ЛИЦА возрастные изменения	Крем - пилинг со стволовыми клетками арганы, Beauty Style		Восстанавливающая смягчающая маска с биоцеллюлозой	
ДЛЯ ВОЛОС выпадение, улучшение роста волос	Шампунь против выпадения волос с биотином KATIVA		Концентрат против выпадения волос с биотином в ампулах KATIVA	
ДЛЯ ТЕЛА антицеллюлит, профилактика варикоза	Роскошный скраб для тела с цветами апельсина или роскошный скраб для тела с дамасской розой		Комплекс антицеллюлитных эфирных масел для коррекции фигуры	

GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>