

GÉZATONE



BIO SONIC 800

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ • РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН • ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ • ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ

BIO SONIC 800

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

GÉZATONE

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



- МОРЩИНЫ НА ЛБУ И ПЕРЕНОСИЦЕ
- «УСТАВШАЯ» КОЖА
- МОРЩИНКИ ВОКРУГ ГЛАЗ
- НЕРОВНЫЙ ТОН ЛИЦА,
ТЕМНЫЕ КРУГИ
- КОМЕДОНЫ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,
ЖИРНЫЙ БЛЕСК КОЖИ
- СУХОСТЬ И ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ
- НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ
- ПИГМЕНТАЦИЯ
И ВОСПАЛЕНИЯ НА КОЖЕ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

BIO SONIC 800

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

GÉZATONE

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ И ПИЛИНГ
- ОТШЕЛУШИВАНИЕ ОРОГОВЕВШИХ ЧАСТИЧЕК И УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ И ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
- УДАЛЕНИЕ КОМЕДОНОВ (ЧЕРНЫХ ТОЧЕК)
- СОКРАЩЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
- УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ
- ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
- СНЯТИЕ ОТЕКОВ И ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ



BIO SONIC 800

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА


GÉZATONE

ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Очищение кожи

Чистка (SOFT PEEL) - программа уменьшения количества кожного себума и загрязнений с поверхностных слоев кожи.

Специальные силиконовые насадки в сочетании с косметическим средством мягко и деликатно очистят кожу от загрязнений и макияжа.

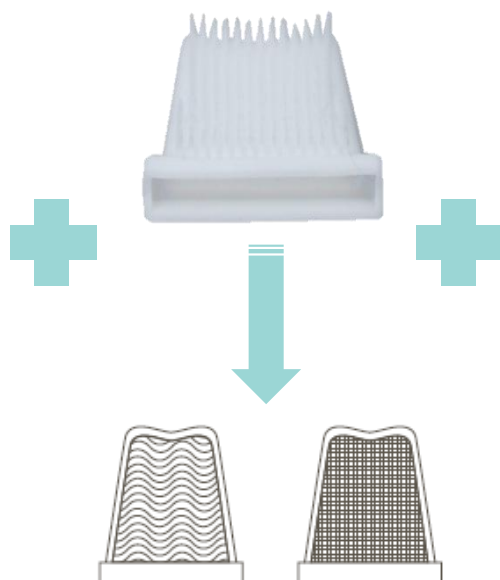

ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

2. Ультразвуковой пилинг

Пилинг (SOFT PEEL)- процедура глубокого очищения кожи, удаления ороговевших клеток эпидермиса, комедонов и шлифовки кожи, уменьшения количества кожного себума с одновременным увлажнением и обогащением кислородом поверхностных слоев кожи.


Глубокое очищение кожи в сочетании со специальными гелями приводит к выраженному улучшению цвета лица, а также способствует ее омоложению.



Эмульгирование и удаление грязи, комедонов из пор

Ультразвуковая волна превращает очищенную жидкость в активную мелкодисперсную эмульсию

Деликатное удаление старых отмерших клеток кожи

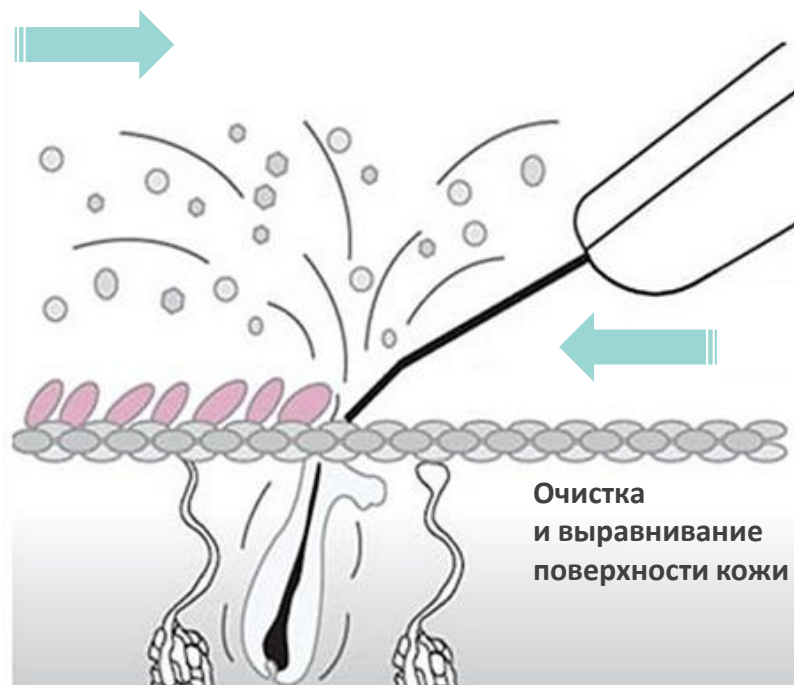


ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

3. Дезинкрустация

Дезинкрустация — процедура очищения лица, сочетающая использование гальванического тока и щелочного раствора. В режиме CLEANSING под действием отрицательного электрода щелочной раствор, соединяясь с жирной кислотой, образует мыло: комедоны в сальных железах омыляются, растворяются и легко выводятся, поэтому процедура подходит даже для очищения чувствительной кожи. Гальванический ток, воздействует на кожу через лосьон-дезинкрустант: щелочной раствор открывает поры, разрыхляет кожу и очищает от ороговевших клеток.

При проведении данной процедуры необходимо зажимать пальцами металлические электроды по бокам прибора.

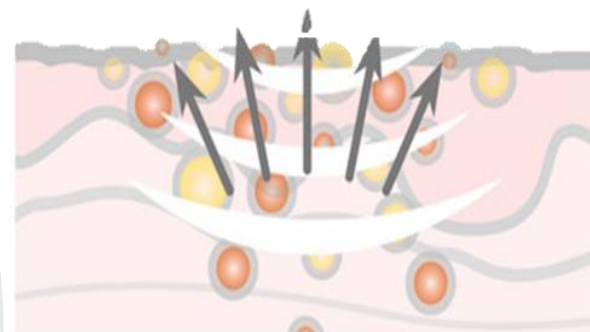

ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

4. Ионофорез (ION-)

Ионофорез — это процедура омоложения кожи методом воздействия гальванического тока в сочетании с косметическими препаратами. В режиме CLEANSING косметические средства, имеющие отрицательный заряд, благодаря свойству гальванического тока повышают проницаемость тканей. Ионофорез дает возможность вводить питательные препараты в более глубокие слои эпидермиса.

В режиме (ION-) проникают отрицательно заряженные препараты.

В этом режиме во время процедуры необходимо зажать металлические контакты по бокам прибора.




ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

5. Микромассаж

Микромассаж оказывает на кожу несколько положительных эффектов

- **Механический эффект** осуществляется за счет передачи ультразвуковых колебаний через тонкий слой косметического средства на водной основе (геля или лосьона), нанесенного на поверхность кожи, запускает процесс регенерации, клеток кожи, оказывает «разволокняющее» действие, которое способствует повышению эластичности рубцовой ткани. Происходит активная подтяжка кожи лица, шеи и декольте, благодаря глубокому микромассажу на клеточном уровне.
- **Тепловой эффект** связан с превращением в тканях акустической энергии в тепло, что улучшает микроциркуляцию, снимает мышечный спазм и ускоряет биохимические реакции и синтез белков молодости - коллагена и эластина.
- **Бактерицидный эффект** стимулирует местный клеточный иммунитет и повышает защитные свойства кожи.

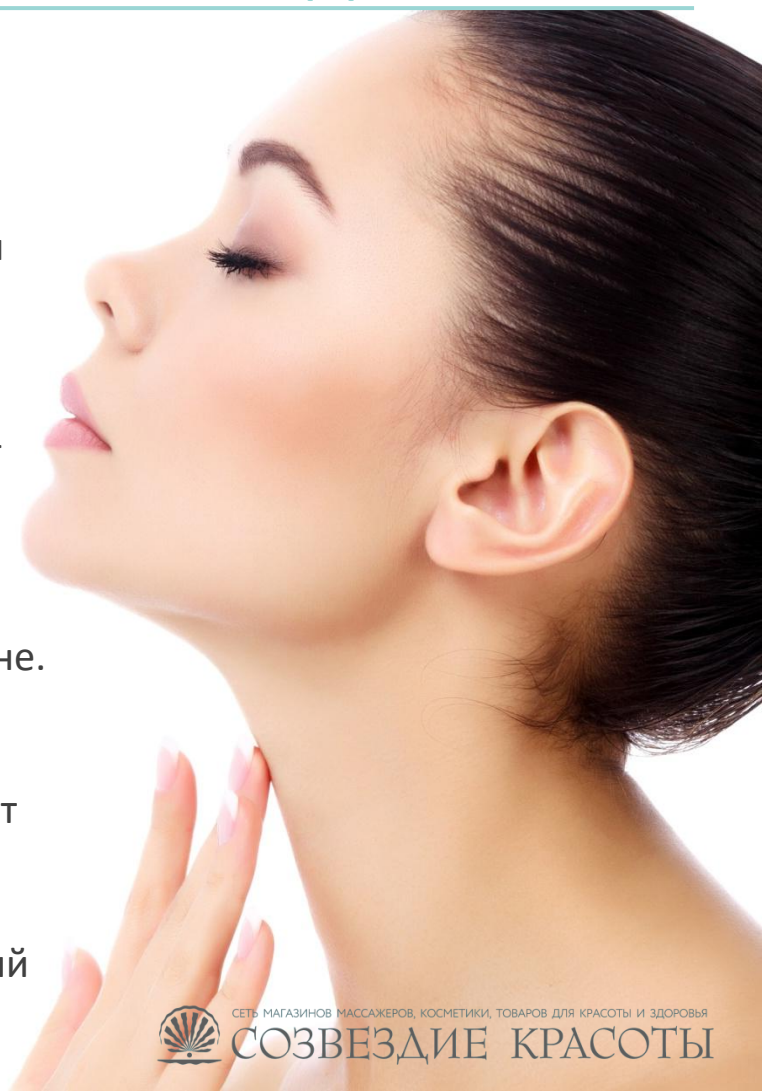


ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

6. Фонофорез



Ультразвуковая волна обеспечивает глубокое проникновение косметических средств за счет превращения их в активную мелкодисперсную эмульсию

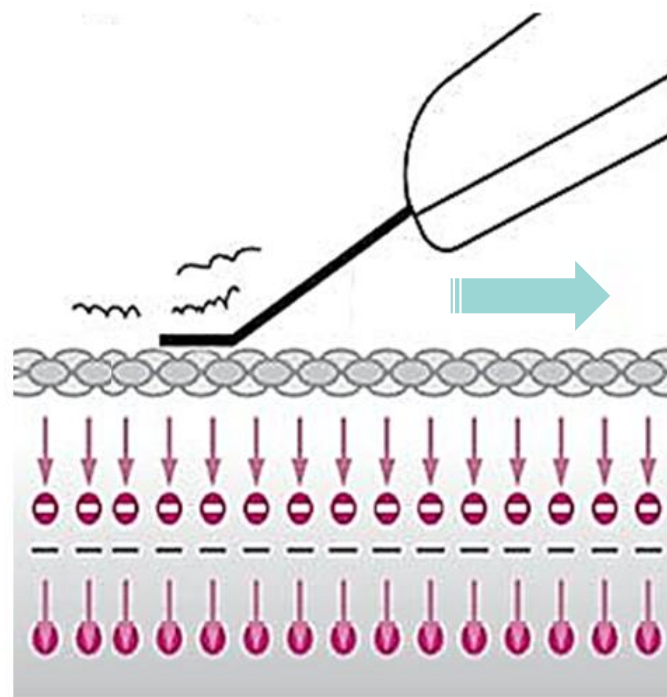

Упругая и эластичная поверхность кожи

Ультразвуковой микромассаж тонизирует кожу

Питание (NUTRITION) - процедура ультразвукового микромассажа кожи, активизирующая кровообращение и обменные процессы внутри клеток, совмещенная с функцией фонофореза косметических препаратов. **Фонофорез** - методика воздействия ультразвуком, способствующая проникновению в глубокие слои кожи активных ингредиентов косметических средств.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

7. Ионофорез

Благодаря свойству гальванического тока повышать проницаемость тканей, ионофорез в режиме NUTRITION дает возможность вводить питательные препараты в более глубокие слои эпидермиса. Особая ценность процедуры ионофореза состоит в том, что она повышает способность кожи удерживать в своих клетках влагу, недостаток которой является главной причиной появления морщин. В режиме NUTRITION проникают положительно заряженные препараты.

В этом режиме во время процедуры необходимо зажать металлические контакты по бокам прибора.



ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

8. Лифтинг


В режиме Лифтинг (LIFTING) прибор генерирует положительно и отрицательно заряженные ионы (ION+/-).

В этом режиме гальванический ток поступает в клеточные ткани, при проведении процедуры с использованием токопроводящего геля, между отрицательным и положительным электродами образуются заряженные ионы направленного действия, снимается "привычный мышечный спазм", формирующий морщины. Заряженные ионы, передвигаясь в тканях, ускоряют обмен веществ, процессы восстановления и регенерации в клетках кожи.

Во время процедуры держать прибор необходимо так, чтобы пальцы находились на специальных металлических вставках по бокам прибора.



Токопроводящий
гель

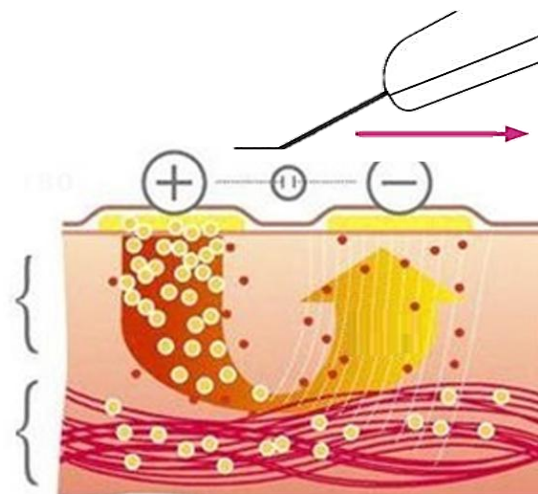

Кожа

Сосуды крови



BIO SONIC 800

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

GEZATONE

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

В основе действия прибора лежит метод деликатного ультразвукового воздействия, которое не травмирует, не растягивает и не деформирует кожу лица.

С помощью прибора Gezatone BIO SONIC 800 Вы не выходя из дома можете провести полный комплекс косметических процедур, включающий:

1. Очищение, ультразвуковой пилинг и дезинкрустация кожи лица
2. Увлажнение и питание (фонофорез и ионофорез) кожи
3. Снятие отеков и лифтинг кожи
4. Осветление кожи и удаление пигментных пятен
5. Разглаживание морщин, повышение тонуса и эластичности кожи

В салонах красоты и косметологических клиниках ультразвуковые методики используются более 15 лет. Сегодня, благодаря современному аппарату Gezatone BIO SONIC 800 Вы можете проводить процедуры по уходу за кожей лица в домашних условиях.



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

BIO SONIC 800

GÉZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Режим Лифтинг
(LIFTING)



Lifting

Режим Питание
(NUTRITION)



Nutrition



Режим Мягкий пилинг и очищение
(SOFT PEEL & CLEANSING)



Soft peel & Cleansing



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

BIO SONIC 800

GÉZATONE


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица BIO SONIC 800 основан на генерации регулируемого по интенсивности ультразвукового сигнала с частотой **25 КГц**, вызывающего невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата – тонкой металлической лопаточки.



Ультразвуковая терапия обладает омолаживающим действием на кожу, дает прекрасный эффект лифтинга лица, стимулирует кровообращение, снимает отеки.

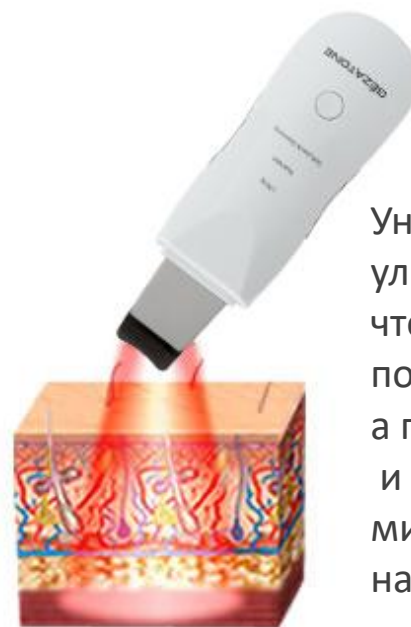

Уникальность действия ультразвука состоит в том, что он не деформирует поверхность кожи, а проходит вглубь и осуществляет микромассаж тканей на уровне клетки.



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

BIO SONIC 800

GEZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

Прибор BIO SONIC 800 Gezatone имеет 7 функций и 2 режима воздействия: постоянный ультразвук и импульсный режим, так что каждый пользователь сможет подобрать для себя наиболее комфортное сочетание функций и воздействий.

Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица BIO SONIC 800 Gezatone очень прост и удобен в применении, а главное комфортен и безопасен в использовании. При работе с прибором не требуется специальных навыков, достаточно лишь соблюдать инструкцию и правильно подбирать специальную аппаратную косметику, а полученный результат приятно удивит не только Вас, но и Ваших близких. BIO SONIC 800 позволит Вам проводить комплексный косметологический уход в домашних условиях, экономя при этом деньги и время.



УНИВЕРСАЛЬНО



БЫСТРО



ЭФФЕКТИВНО



УДОБНО



РЕЗУЛЬТАТИВНО



БЕЗОПАСНО



ВЫГОДНО



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Регулярный уход подразумевает очищение с использованием входящих в комплект щеточек (брашинг), питание с использованием гальванических токов (ионофорез) и стимуляцию естественных процессов омоложения (лифтинг). Такое сочетание справится с возрастными изменениями, сделает кожу сияющей и молодой.

БРАШИНГ проводится утром для подготовки кожи к макияжу и вечером для удаления загрязнений и остатков декоративной косметики.

ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ в рамках регулярного ухода проводится 1-2 раза в неделю.

ИОНОФОРЕЗ И ЛИФТИНГ можно проводить ежедневно в течение первых 1-1,5 месяцев, затем процедуры проводятся 1 раз в 2 дня.

Интенсивный уход включает в себя дезинкрустацию, УЗ-пилинг и УЗ-массаж.

Активное взаимодействие методик и косметических препаратов глубоко и бережно очищает кожу, устраняет следы возраста, разглаживает морщины и повышает тонус кожи.

УЗ-пилинг и УЗ-микромассаж проводится активными курсами из 10-15 процедур не чаще 2х раз в неделю.

Перед ультразвуковым очищением допустимо проводить дезинкрустацию, чтобы повысить эффективность процедуры.

Между активными процедурами допустимо использовать прибор для регулярного ухода, проводя брашинг, ионофорез и лифтинг.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

	ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД			РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД		
	Курс	УЗ-очистение препараты	Фонофорез препараты	Курс	Брашинг препараты	Ионофорез препараты
Жирная кожа Расширенные поры	1-2 раза в неделю 4 недели	Очищающий гель «Ультраклин контроль» Beauty Style	Гель активный «Аква-гель Алоэ вера» Beauty Style	3-4 раза в неделю	Очищающий гель для жирной и кожи «Контроль» Beauty Style	Ботаническая маска с лавандой Дезинкрустация Лосьон-дезинкрустант
Сухая кожа	1-2 раза в неделю 3-4 недели	Очищающий пилинг-гель «Холодное гидрирование «Аква 24» Beauty Style	Увлажняющий активный концентрат с гиалуроновой кислотой + проводящий гель	3-4 раза в неделю	Увлажняющий крем-пилинг Аква 24 Beauty Style	Увлажняющий комплекс «Кристалльный родник» заряд (-) + проводящий гель
Увядающая кожа, морщины	1-2 раза в неделю 4-6 недель	Гель для УЗ-пилинга «Ультраклинсенс»	Комплекс (сыворотка) с ВНА (омолаживающий) Beauty Style + проводящий гель	2-3 раза в неделю	Крем-пилинг со стволовыми клетками органы Beauty Style	Увлажняющий комплекс «Молодость без границ» заряд (-) + проводящий гель
Чувствительная кожа	1-2 раза в неделю 3-4 недели	Гель для глубокого очищения кожи «Комфорт» Beauty Style	Активный концентрат «Антистресс/Антиэйдж» + проводящий гель	2-3 раза в неделю	Крем-пилинг со стволовыми клетками органы Beauty Style	Противокуперозный комплекс «Комфорт» заряд (+) + проводящий гель
Кожа с пигментацией, неровный тон, рубцы	1-2 раза в неделю 3-4 недели	Гель для УЗ-пилинга «Ультраклин сенс»	Тонизирующий активный концентрат с экстрактом огурца и витамином С + проводящий гель	2-3 раза в неделю	Увлажняющий крем-пилинг Аква 24 Beauty Style	Лифтинговый комплекс «Совершенство» заряд (-)+ проводящий гель

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Нарушения сердечного ритма (аритмии), носящие приступообразный характер (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия)
- Недостаточность кровообращения свыше II Б степени
- Болезни крови, тромбозы, тромбозы вен
- Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов
- Онкологические заболевания кожи
- Нарушение целостности кожных покровов – раны, ссадины, трофические язвы
- Острые воспалительные и гнойные процессы
- Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов
- Психические заболевания
- Период беременности
- Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты и брекет-системы
- Плохое самочувствие пациента (рекомендуется перенести проведение процедуры)
- Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах: глаза, область над сердцем и щитовидной железой, над силиконовыми имплантатами, в областях с гелевой контурной пластикой



BIO SONIC 800

GÉZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели: Bio Sonic 800 Прибор ультразвуковой Gezatone

Артикул: 1301182С

Частота ультразвука: 25 кГц

Выходная мощность ультразвуковых колебаний: не более 0,8 Вт/см²

Выходные параметры сигналов:

SOFT PEEL & CLEANSING:

Напряжение на электроде (постоянный ток) - 0,7..-1,0 В. (не зависит от уровня мощности ультразвука)

Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,8 мс.

Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 19,2 мс.

NUTRITION:

Напряжение на электроде (постоянный ток): +0,7..+1,0 В. (не зависит от уровня мощности ультразвука)

Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,9 мс.

Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 7,3 мс.

LIFTING:

Напряжение на электроде (двуполярные импульсы частотой $\approx 1...1,5$ Гц): +/-1,4..2,0 В.

(не зависит от уровня мощности ультразвука)

Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,8 мс.

Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 11,6 мс.

Напряжение питания, тип встроенного аккумулятора литий-полимерная, 3,7 В/ 600мА*ч

Время полной зарядки: 2,5 часа

Выходные параметры зарядного устройства: DC 5В/., не менее 500мА (в комплект не входит) разъем USB, тип А

Температура хранения: от +15С° до +30С°

Допустимая влажность не более 70%

Размер в упаковке: (ДхГхВ) 210x150x35 мм

Вес в упаковке: 0,3 кг

ШК: 3004564030401



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>