



сеть фирменных магазинов  
**СОЗВЕЗДИЕ**  
**КРАСОТЫ**

## ПАРОВАЯ САУНА ДЛЯ ЛИЦА Gezatone 105S

### ПАРОВАЯ САУНА ДЛЯ ЛИЦА GEZATONE 105S

Паровая сауна для лица поможет вам не только очистить кожу, но и подготовит кожу к проведению многих косметических процедур! Мягкое воздействие пара, удобная чаша, и насадка для ингаляции в комплекте.



### МЕТОД КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА - ВАПОРИЗАЦИЯ

**Вапоризация** - косметическая процедура, основанная на механическом и температурном воздействии распыляемых под давлением водяных брызг (пара) на кожу лица.

- ❑ **Суть метода:** сочетание механического и термического воздействия теплых тончайших водяных брызг. Попадая на кожу, они распаривают ее, одновременно массируя и очищая.
- ❑ **Процедура способствует** размягчению и удалению комедонов, а также улучшает кровообращение и стимулирует эластичность кожных тканей. В результате кожа приобретает здоровый вид и выглядит заметно посвежевшей.
- ❑ **Технология проведения:** в зависимости от возраста пациента и состояния кожи, наличия показаний и противопоказаний осуществляется распаривание лица специальным прибором «Паровая сауна». Струя пара подается на лицо в течение 10-20 мин в зависимости от типа кожи. Распаривание кожи усиливает кровообращение, расширяет поры, стимулирует секрецию сальных и потовых желез, удаляя загрязнения.


### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вапоризация применяется перед многими косметологическими процедурами: очисткой кожи с помощью эмульсии или скраба, перед броссажем, перед УЗ чисткой, а также перед маской, создавая более благоприятные условия для проникновения питательных веществ.

- ❑ Подготовка и распаривание кожи перед процедурой очищения. После применения сауны можно провести вакуумную чистку кожи, очистить с помощью брашинга или осуществить УЗ пилинг.
- ❑ Глубокое увлажнение кожи, восстановление гидробаланса. Чтобы достичь максимального эффекта, необходимо после процедуры использовать увлажняющую косметику.
- ❑ Подготовка к нанесению косметических масок и кремов. Благодаря воздействию сауны поры кожи открываются, и косметические средства гораздо лучше усваиваются, действуя намного эффективнее.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❑ Прозрачная маска, имеющая анатомическую форму для удобства применения
- ❑ Регулировка парообразования для комфортной подачи пара
- ❑ Насадка для проведения ингаляции
- ❑ Возможность использования травяных настоев и ароматических добавок
- ❑ Легкость ухода и хранения
- ❑ Ароматерапия
- ❑ Свежий и здоровый цвет лица
- ❑ Глубокое очищение пор и увлажнение кожи

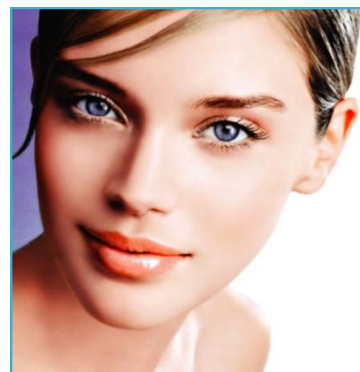



сеть фирменных магазинов  
**СОЗВЕЗДИЕ  
КРАСОТЫ**

## ПАРОВАЯ САУНА ДЛЯ ЛИЦА Gezatone 105S

### ОСОБЕННОСТИ ПАРОВОЙ САУНЫ ДЛЯ ЛИЦА Gezatone 105S

Благодаря нагревательному элементу, сауна создает мягкий пар, который подготавливает кожу к очистке, открывает поры, увлажняет и укрепляет кожу лица. Резервуар сауны предназначен для воды или травяных настоев, но не рекомендуется для использования эфирных масел или спиртовых растворов.

#### БОЛЬШАЯ ЧАША

Большая чаша для лица идеально прилегает к лицу, обеспечивая комфортность процедуры. Регулятор парообразования сделает процедуры с паровой сауной максимально комфортными.



#### МАЛАЯ НАСАДКА

Малая насадка позволяет проводить оздоровительные процедуры ингаляции, которые увлажняют дыхательные пути и являются прекрасной профилактикой простудных заболеваний.



### РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Для ухода за нормальной и жирной кожей рекомендуется использовать паровую сауну 2-3 раза в неделю; если кожа чувствительная и склонная к раздражениям, то достаточно одной процедуры в неделю.
- При жирной пористой коже рекомендуется проводить вапоризацию в течение 20 минут, при нормальной - не более 15 минут, а при сухой - 5-7 минут.
- Регулярное использование паровой сауны делает кожу более мягкой и эластичной, улучшает ее внешний вид, повышает упругость.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Открытые раны и заболевания кожи лица
  - Прием обезболивающих препаратов
- Не рекомендуется применять сауну в следующих случаях:**
- При лихорадке
  - При гнойничковых заболеваниях на коже лица
  - При наличии раздражений на коже лица
  - При сильных болях

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование:	Паровая сауна для лица Gezatone 105S
Артикул:	1301061
Напряжение питания:	АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	не более 70 Вт
Режим работы:	непродолжительный
Диапазон рабочих температур:	+15...35°C
Допустимая влажность:	не более 85%
Размеры упаковки:	190x240x210 мм
Произведено:	Gezanne ITC, Франция.
Гарантийный срок эксплуатации:	1 год.